



# Hygiene A-Z

Das Hygienekonzept für Ihre Praxis

2019 | 2020



HYGIENE  
IN ALLER  
MUNDE

ab Seite 2



GERÄTE  
AUSRÜSTUNG

ab Seite 10



PROKONZEPT®  
HYGIENE-  
MANAGEMENT

ab Seite 6



SCHUTZ-  
AUSRÜSTUNG

ab Seite 30



HYGIENE-  
AUSRÜSTUNG

ab Seite 18



HYGIENE-  
MATERIALIEN

ab Seite 22



KENNZEICHEN-  
SYSTEME

ab Seite 34



HAUTPFLEGE

ab Seite 33



SOFT- UND  
HARDWARE

ab Seite 7



TEST-  
VERFAHREN

ab Seite 16



INSTRUMENTE  
ZUBEHÖR

ab Seite 8



PATIENTEN-  
ZUBEHÖR

ab Seite 29

Jetzt über 60.000  
Artikel schnell und  
einfach im Online-Shop  
bestellen:  
[www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de)



EINRICHTUNG  
AUFBEREI-  
TUNGSRaum

ab Seite 8

Hotline  
00800  
77655440

bundesweit zum Nulltarif

[www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de)



# Hygiene in aller Munde

**Manchmal ist gerade das, was man nicht sieht, am Wichtigsten: Strengste Sauberkeit und penible Hygienemaßnahmen geben Patienten ein gutes Gefühl und garantieren Behandlern einen Platz auf der rechtssicheren Seite. Im Interview erläutert Hygienespezialistin Yvonne Stadtmüller, Vertriebs- und Produktmanagerin für das dental bauer PROKONZEPT®, den aktuellen Status quo.**

## Wie brisant ist das Thema Praxisbegehung derzeit?

Die behördlichen Überwachungen von Zahnarztpraxen stehen weiter im Fokus der einzelnen Bundesländer, mit vielen Schwerpunkten wie QM-System, ordnungsgemäßer Ablauf des gesamten Hygienekreislaufs, Validierung, Wasserhygiene, Risikoeinteilung und vieles mehr. Die Mängelberichte von diesen Praxisbegehungen resultieren leider immer noch von viel Unwissenheit, Unsicherheit und dem dringenden Bedarf, das Hygienewissen aufzufrischen.

## Welche konkreten Anforderungen stellt eine Praxisbegehung an das Praxisteam?

Bei einer Überwachung wird der komplette Hygienekreislauf beleuchtet, die folgende Liste zeigt die maßgeblichen Punkte auf:

- Bestandsverzeichnis der aktiven nicht implantierbaren Medizinprodukte (§13 MPBetreibV)
- Dokumentation der regelmäßigen Inspektionen/Wartungen gemäß Herstellerangaben an den Dentaleinheiten (MPBetreibV)
- Prüfprotokolle für die wiederkehrende Prüfungen, der messtechnischen und/oder sicherheitstechnischen Kontrollen (MTK/STK) (§2, §6, §11 MPBetreibV)
- Verfahrens-/ Arbeitsanweisungen für die Aufbereitung der Medizinprodukte (§4 MPBetreibV, RKI-Richtlinie)
- Einstufung der Medizinprodukte (§4 MPBetreibV, RKI-Richtlinie)
- Aktuelle Validierungsberichte (§8 MPBetreibV, RKI-Richtlinie)
- Fachkunde bzw. Sachkundenachweise vom Personal (§8 MPBetreibV, RKI-Richtlinie)
- Dokumentationen, Freigaben der Medizinprodukte und den Routinekontrollen (§4 MPBetreibV, RKI-Richtlinie)
- Sicherheitsdatenblätter, Gebrauchsanweisungen, Bedienungsanleitungen, Herstellerangaben zugänglich (§9 MPBetreibV)
- Gefahrstoff-Kataster-Verzeichnis (ChemG und GefStoffV)
- Nachweis der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung und nachweisliche Impfungen (BG, UVV, BuS, Arbeitsschutzgesetz)
- Mikrobiologische Überprüfungen wasserführender Systeme (RKI 2012, TrinkwV)
- Separater Personalaufenthalts-/Umkleideraum mit getrennter Aufbewahrung Straßen-/Berufskleidung (TRBA 250, TRBA 500)
- Handwaschplätze mit Seife- und Händedesinfektionspender und Einmalhandtuchspender (TRBA 250)
- Art der zahnärztlichen Tätigkeiten in der Praxis z.B. Kons., Chirurgie, PA, Endo
- Anzahl der Behandler, Mitarbeiter auch Reinigungspersonal
- Schriftliche Regelung der Verantwortlichkeiten bzw. Zuständigkeitsbereiche und Vertretungen

## Aber nicht jede Zahnarztpraxis wird durchleuchtet ...

Mein Leitsatz hierzu: **Vorsorge ist besser als Nachsorge.** Die Liste der Anforderungen ist sehr lang – das ist bei laufendem Betrieb nicht mal eben in den durchschnittlich nur vier Wochen Vorlaufzeit von der schriftlichen Ankündigung bis zur tatsächlichen Praxisbegehung zu schaffen! Hygiene ist und bleibt ein zentrales Thema in der Praxis. Ein funktionierendes Hygienemanagement schützt sowohl die Behandler und ihre Teams als auch – und vor allem – die Patienten. Man sollte



nicht erst abwarten, bis der Brief zur Begehung in die Praxis flattert, sondern schon jetzt aktiv werden.

## Wer kann bei der Umsetzung all dieser Anforderungen helfen?

Im ersten Schritt lohnt sich die Vereinbarung eines Termins für die „Belastungsprobe“, eine unentgeltliche Hygieneberatung mit unseren dental bauer-Experten. Wir möchten Praxisteam bestmöglich bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur sachgerechten Aufbereitung ihrer Medizinprodukte unterstützen und stellen dafür die richtigen Werkzeuge zur Verfügung.

## Braucht man denn wirklich ein QM-System für die Praxisbegehung?

Das vorhandene QM-System wird in jeder Praxisbegehung genau betrachtet: Funktioniert und lebt das System? Liegen für den gesamten Hygienekreislauf Arbeitsanweisungen vor? Gibt es ein Bestandsverzeichnis? Wie steht es um die Einstufung der Medizinprodukte?

All das und vieles mehr wollen die prüfenden Behörden haar-

klein sehen. Meine Erfahrung zeigt, dass fast keine Praxis die Dokumente und Unterlagen vollständig und ad hoc parat hat. Der Dokumenten- und Verwaltungsaufwand wird schließlich nicht weniger im Praxisalltag.

Wir von dental bauer liefern Lösungskonzepte, um eine erfolgreiche Praxisbegehung zu absolvieren. Mit **PROKONZEPT®** stellen wir ein Instrument zur Verfügung, das Praxisteam optimal, sicher und zuverlässig auf Praxisbegehungen vorbereitet – dank eines softwarebasierten Dokumentenmanagementsystems mit allen Unterlagen für die wichtigsten Kernbereiche der Praxis:

- Gerätemanagement
- Hygienemanagement
- Praxismanagement
- Sammlung an Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen

Mit **PROKONZEPT®** kauft man nicht nur ein Programm, sondern erhält während der gesamten Laufzeit von zwei Jahren einen individuellen Service. Das ist der größte Benefit von **PROKONZEPT®**: Unsere Fachberater unterstützen das Praxisteam bei der Umsetzung von der Dokumentenindividualisierung mit all ihrem Know-how und gesammelter Fachkompetenz.




**Wie stark liegt der Fokus auf der Sachkenntnis des mit der Aufbereitung betrauten Personals?**

Sehr häufig werden in den behördlichen Praxisbegehungen die Kenntnisse zur Sachkunde der Mitarbeiter bemängelt, da diese nicht ausreichend sind und nicht mittels Nachweisen belegt werden können. Dabei ist und bleibt Hygiene eine tragende Säule der Zahnarztpraxis – das Personal muss also vom Wissensstand am Puls der Zeit sein. Es ist daher dringend zu empfehlen, geeignete Fortbildungen zu besuchen. Wir bieten in den dental bauer-Niederlassungen den Ganztageskurs „Hygiene durchdacht – Praxisbegehung up to date“


(siehe Seite 35) an. Es ist unser Ziel, den Hygienekreislauf, das Bewusstsein und die Vielzahl an Anforderungen den Praxen zugänglich zu machen und dort zur richtigen Anwendung und Umsetzung zu bringen. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer die praktische Durchführung der gesetzlichen Hygienevorgaben – mit jeder Menge Tipps und Beispielen aus der Praxis für die Praxis.

**Wie lautet Ihr Fazit?**

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deshalb gilt es, die Hygienevorschriften zu kennen und umzusetzen!

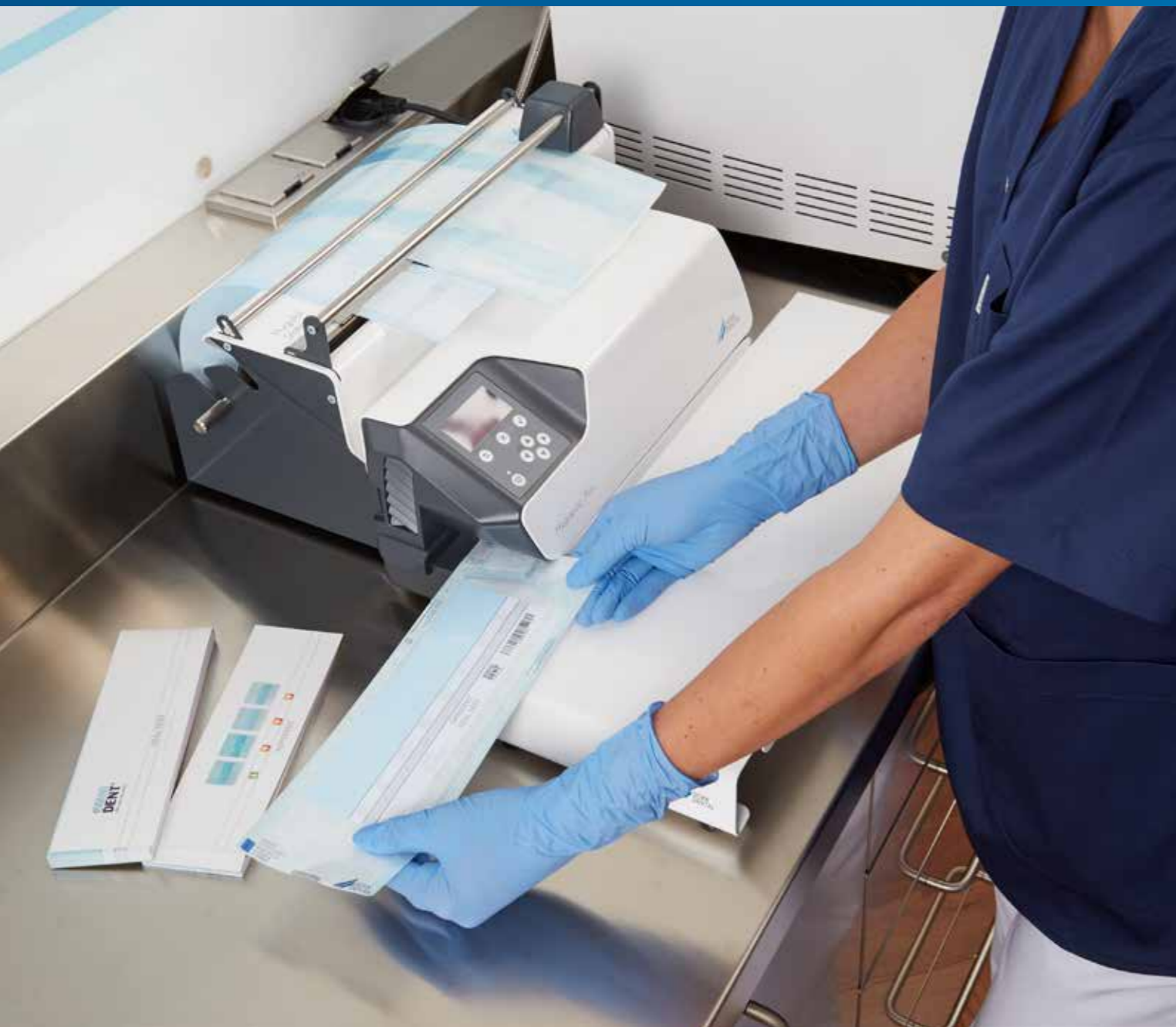

13 Dokumentation, Freigabe und Kennzeichnung

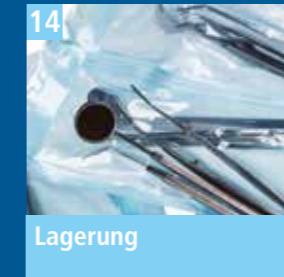

14 Lagerung



1 Bereitstellung



2 Behandlung



3 Vorbereitung der Aufbereitung



12 Sterilisation



4 Transport



11 Verpackung



5 Abfallentsorgung



10 Funktionskontrolle



9 Pflege und Wartung



8 Kontrolle auf Unversehrtheit und Sauberkeit



7 Reinigung & Desinfektion (RDG)



6 Vorbereitung (Zerlegen, Vorreinigen, Ultraschall)

**Neugierig geworden oder Hilfe nötig?**  
Dann schicken Sie uns einfach eine Nachricht an [prokonzept@dentalbauer.de](mailto:prokonzept@dentalbauer.de)





HYGIENE


# Digitales Management mit System

Sie bevorzugen eine professionelle und smarte Unterstützung bei der Vorhaltung der geforderten Dokumente?  
Dann ist PROKONZEPT® für Sie das passende Instrument.  
PROKONZEPT® ist ein softwarebasiertes Dokumentenmanagement-System für die wichtigsten Kernbereiche der Praxis:

- Gerätemanagement
- Hygienemanagement
- Praxismanagement
- Sammlung an Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen

Auf Knopfdruck haben Sie Zugriff auf sämtliche Arbeitsanweisungen, Prüfprotokolle, dem Bestandsverzeichnis usw. Damit ist jede Praxis optimal, sicher und zuverlässig auf Praxisbegehungen vorbereitet und hat darüber hinaus eine perfekte Ergänzung des Qualitätsmanagement-Systems.

Neugierig geworden? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an: [prokonzept@dentalbauer.de](mailto:prokonzept@dentalbauer.de)

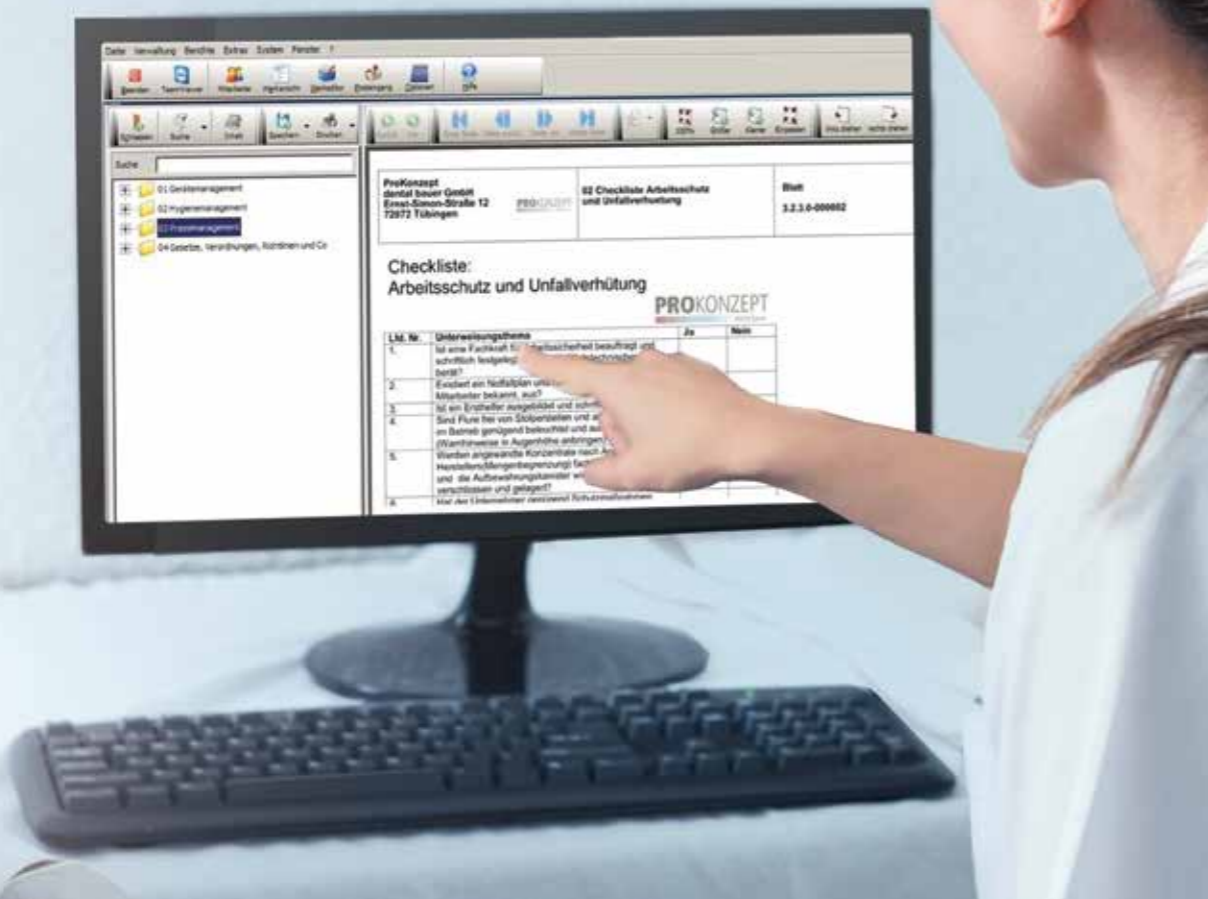

**Standard-Paket**

- Grundpaket
- Gerätemanagement bis 5 Zimmer (pro weiteres Zimmer EUR 160,00)
- Laufzeit 2 Jahre

keine Material-Abnahme-Vereinbarung  
(die Laufzeit beginnt zum 1. des Folgemonats zum Auftragsdatum)

**EUR 5.990,00**  
zzgl. MwSt.

**Premium-Paket**

- Grundpaket
- Gerätemanagement bis 5 Zimmer (pro weiteres Zimmer EUR 160,00)
- Laufzeit 2 Jahre

Für alle Kunden die bereits eine Premiumvereinbarung abgeschlossen haben.  
(mind. EUR 10.000,00 Material-Abnahme-Vereinbarung pro Jahr oder Umwandlung einer Startervereinbarung in eine Premiumvereinbarung, mind. EUR 10.000,00 Material-Abnahme-Vereinbarung pro Jahr, Nachbelastung bei Nichterfüllung EUR 2.000,00 im jeweiligen Folgejahr. Die Laufzeit beginnt zum 1. des Folgemonats zum Auftragsdatum.

Fragen Sie nach unseren attraktiven Leasingangeboten!

**EUR 3.990,00**  
zzgl. MwSt.

SOFT- UND HARDWARE

diosMP



**Angebot 1: Software und Einbindung**

Das VisionmaxX-Modulkonzept ermöglicht es, die reine Geräteanbindung auf die vorhandene EDV-Hardware aufzubauen. Benötigt werden lediglich ein vorhandener, beliebiger PC in Ihrer Praxis sowie ein Netzwerkanschluss im Sterilisationsraum.

**Das Angebot umfasst:**

- diosMP Hygiene
- notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Installation der Hardware und der Software diosMP Hygiene in Ihrer Praxis
- Konfiguration der Geräte in dios
- Kurzeinweisung
- Standard-Anfahrtszuschale

\* Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

**EUR 1.400,00\***



diosMP

**Angebot 2: Computer, Software und Einbindung**

Diese Ausbaustufe der Dokumentation erfolgt über eine eigene EDV-Hardware im Sterilisationsraum. Benötigt wird hierfür ein Netzwerkanschluss im Aufbereitungsraum. Falls kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, können Alternativen wie WLAN geprüft werden.

**Das Angebot umfasst:**

- diosMP Hygiene
- PC-Monitorlösung All-in-One 22" in Farbe Weiß (CPU Intel i3, 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD, Windows 10 Pro)
- Wandbefestigung für All-in-One-PC
- desinfizierbare Tastatur- und Mauslösung
- notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Etikettendrucker, 1.000 Stück Haftetiketten
- Barcodescanner USB
- Installation der Hardware und der Software diosMP Hygiene in Ihrer Praxis
- Anbindung von diosMP Hygiene an Ihre Praxisverwaltungsoftware
- Konfiguration der Geräte in diosMP Hygiene

\* Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

**EUR 3.500,00\***



**Hygiene-Mouse**

- Robuste, versiegelte Maus
- versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung
- mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 10% Bleiche zu reinigen
- 3 Tasten für Scrollfunktion
- USB Plug & Play
- Abmessung 11 cm x 6 cm x 4 cm
- 3 Jahre Garantie

Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

**EUR 122,00**



**Hygiene-Keyboard**

- Wasserdichte, desinfizierbare, geräuschlose 30 cm Tastatur
- versiegeltes Silikondesign für eine staubfreie, keimfreie und wasserresistente Anwendung
- mit Wasser und Seife, Desinfektionsmitteln oder 10% Bleiche zu reinigen, selbst im laufenden Betrieb durch Tastensperre
- keine mechanischen Bauteile
- exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag
- USB Plug & Play
- Abmessung: 30 cm x 14 cm x 1,5 cm
- 3 Jahre Garantie

Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

**EUR 179,00**



**USB-Datenlogger**

USB-Datenlogger zur Temperaturkontrolle für die Lagerung von pharmazeutischen, medizinischen sowie anderen temperatursensiblen Produkten wie z. B. im Kühlschrank.

Auslieferung und Rechnungsstellung durch unseren Partner VisionmaxX GmbH.

**EUR 75,00**



# Perfekte Hygiene

INOXKONZEPT® das durchdachte modulare Hygieneablaufsystem für „sichtbare Hygiene“ im Aufbereitungsraum.

Mit INOXKONZEPT® entscheiden Sie sich für eine bis ins Detail überzeugende Hygienelösung, die durch puristisches Design aus Edelstahl, ohne organische Materialien, intuitive Funktionalität, hochwertige Qualität und lange Lebensdauer den heutigen Standard in puncto Ausstattung des Aufbereitungsraums setzt.



- 1 Müllschrank mit „touchfree“-Bedienung
- 2 Waschbeckenschrank
- 3 Einbauplatz für RDG
- 4 Installationsschrank
- 5 Schubladenschrank
- 6 Kanister-Abfüllstation
- 7 Tastatur und Dokumentations-Ordnerschrank
- 8 Edelstahlarbeitenplatte mit Waschbecken ohne Überlauf
- 9 Funktionsaufkantung für Kabeldurchführungen, für Steckdosen oder Lichtlupe usw.
- 10 Spenderoberschrank

**Preisbeispiel 1:**  
Die dargestellte Möbelzeile mit allen Schränken, inkl. Steckdosen ohne Geräte und Zubehör  
L: 370 cm, T: 71 cm

EUR ab  
12.590,00  
zzgl. Montage und  
MwSt.

SCHMID  
Möbel



## Hygiene Basisschrank

Klappe mit Schließautomatik und Kunststofffront. Innenaufteilung mit zwei Mittelseiten zur Aufnahme folgender Modularten (Lieferinhalt):

- Seife und Desinfektionsspender, ohne Spender (passend für Infracronic IT 1000 AW Euro oder Masterspender, bei Auftrag Prüfung der Möglichkeit)
- Papier-, Mundschutz- und Becherspender
- 2 Handschuhspender

1.038 mm breit, 400 mm hoch und 305 mm tief  
Front Melaminharz beschichtet, weiß

Art.-Nr. 763620

EUR  
998,00  
zzgl. MwSt.

miscea  
The new standard



## Miscea sensorgesteuerte Armatur

Die perfekte und hygienische Lösung für den Aufbereitungsraum. Die miscea ist eine Wasserarmatur mit zwei integrierten Spendern für Seife und Desinfektionsmittel. Ihre Bedienelemente für die Wasserentnahme, die Verstellung der Wassertemperatur und der Spender werden berührungslos aktiviert.

### Armatur für Beutel mit Wassermengenregler

- inklusive Elektronik (Chromglanz poliert) Waterbox, Elektronik und Magnetventil Soapbox für Vakuumbbeutel mit Seife und Desinfektionsmittel,
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage,
- 2x 850 mm Edelstahl-Panzerschlauch für Warm- und Kaltwasseranschluss,
- Netzstecker,
- 1 Liter Nachfüllmedien, Bedienungsanleitung

Stück Art.-Nr. 702544

EUR  
1.045,00  
zzgl. Montage  
und MwSt.

### Armatur für Flaschen mit Wassermengenregler

- inklusive Elektronik (Chromglanz poliert) Waterbox, Elektronik und Magnetventil Soapbox für Vakuumbbeutel mit Seife und Desinfektionsmittel,
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage,
- 2x 850 mm Edelstahl-Panzerschlauch für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Netzstecker
- 1 Liter Nachfüllmedien, Bedienungsanleitung

Stück Art.-Nr. 706929

EUR  
1.112,00  
zzgl. Montage  
und MwSt.



**MELAtherm 10 mit Grundbestückung**

MELAtherm 10 ist ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) nach Europa-Norm EN 15883. Das Gerät ist bei der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten ideal einsetzbar. Mit aktiver Trocknung und kurzen Betriebszeiten. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Sprühdruk und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder Bedienungsfehler werden vermieden.

Das innovative Konzept des MELAtherm bietet der Praxis alle Vorzüge für schnelle, ergonomische, sichere und vor allem kostensparende Aufbereitung.

**MELAtherm 10 DTA 400 V\***

- 1x Basiskorb mit Injektorschiene, inkl. 2 Zentralfilter (nur bei Variante mit Zentralfilter)
- 1x Kartenlesegerät für MELAflash,
- 1x Flexkorb 2,
- 1x Einsatzgestell für 3 MELAstore,
- 3x MELAstore-Tray 100,
- 1x Einsatzgestell für Abdrucklöfel,
- 1x Kleinteile-Behälter,
- 1x Instrumentenkorb standard 1

ohne Cleanfinityfilter Art.-Nr. 757554  
mit Cleanfinityfilter Art.-Nr. 757555

EUR  
8.690,00

ohne Cleanfinityfilter

EUR  
9.280,00

mit Cleanfinityfilter

Abbildung enthält optionales Zubehör

\*Alternativ auch als DTB Variante mit 230 V erhältlich



**Vacuklav 40 B+ Evolution mit MELAdem 53**

Der Premium Schnell-Autoklav. Ideal und praktisch für die Zahnarztpraxis, die in nur 17 Minuten Gesamtbetriebszeit verpackte Instrumente im Schnell-B Programm und in sogar nur 10 Minuten unverpackte Instrumente sterilisieren möchte. Jeweils inklusive fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung!

Das intuitive Bedienkonzept erlaubt die unkomplizierte und sichere Bedienung mit dem extra großen Farb-Touch-Bildschirm. Programme schnell und einfach finden und auswählen, Fehler vermeiden, einfach dokumentieren.

(ausschließlich nutzbar bei Anschluss von vorhandenem RDG)

**Vacuklav 40 B+**

- 8 Tablett
- MELAdem 53
- CF-Karte
- Lesegerät
- MELAcontrol Pro
- Wasserverteiler

Art.-Nr. 757525

EUR  
8.560,00



**Folienhalter kurz**

Der Halter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingeschweißtem Sterilgut.  
- für optimale Trockenergebnisse  
- geeignet für Sterilisationstyp 30 B+/31 B+/40 B/41 B  
- Kesseltiefe: 35 cm (kurz)  
- bis 18 Liter Volumen

Stück Art.-Nr. 340488

EUR  
91,50



**Folienhalter lang**

Der Halter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingeschweißtem Sterilgut.  
- für optimale Trockenergebnisse  
- geeignet für Sterilisationstyp 23 B+/24 B+/43 B/44 B  
- Kesseltiefe: 45 cm (lang)  
- bis 24 Liter Volumen

Stück Art.-Nr. 473535

EUR  
91,50



**Paket 1 mit Einzelfiltergehäuse**

Bei vorhandenem Basiskorb ohne Zentralfilter:  
- 1x Injektorkorb Flex 1  
- 6x ZEG-Spitzen Adapter  
- 2x Einzelfiltergehäuse  
**wahlweise:**  
2x Metall-Filterzscheibe. Alle 20 Zyklen im Ultraschallbad aufbereitbar. Im Paket für insgesamt 400 Zyklen einsetzbar  
**oder** 2x Keramik-Filterzscheibe, je 10 Stück. Alle 20 Zyklen auszuwechseln. Im Paket für insgesamt 200 Zyklen einsetzbar.

Art.-Nr. 471678

EUR  
665,00



**Paket 2 mit Cleanfinity Filter**

Bei vorhandenem Basiskorb mit Zentralfilter:  
- 1x Injektorkorb Flex 1  
- 6x ZEG-Spitzen Adapter  
- 1x Reinigbarer Zentralfilter  
Als Ersatz, wenn der bisherige Zentralfilter erschöpft ist.

Art.-Nr. 614076

EUR  
679,00



Abbildung ohne Rollenhalter

**MelaSeal 200**

Das MelaSeal 200 vereint Zuverlässigkeit, Funktionalität und Komfort mit den kompakten Abmessungen eines Balkensiegelgeräts.  
- Es ist validierbar!  
- Nur 90 Sekunden nach dem Einschalten ist das Siegelgerät einsatzbereit  
- Die Klarsicht-Sterilisierverpackungen werden ohne Pause in nur 3 Sekunden sicher versiegelt  
- Alle Parameter der erzeugten Siegelnaht werden überwacht und auf dem Display angezeigt  
- MelaSeal 200 verfügt zusätzlich über zwei USB-Schnittstellen zur Dokumentation mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Stick oder zum Anschluss an einen PC

MelaSeal 200 inkl. USB-Stick	Art.-Nr. 638016	EUR 1.059,00
Rollenhalter „Deluxe“	Art.-Nr. 754573	EUR 299,00
Rollenhalter „komfort“	Art.-Nr. 752727	EUR 99,00
Rollenhalter „standard“	Art.-Nr. 366745	EUR 69,00
Wand-Rollenhalter	Art.-Nr. 420253	EUR 67,00



**MelaSeal Pro**

Validierbares Durchlaufsiegelgerät. Das leistungsfähige Durchlauf-Siegelgerät ist schnell, effektiv und für den Dauerbetrieb geeignet.  
- Fehlervermeidung durch intuitive Bedienung mit Softkeys und LCD-Display  
- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen, validierbar gemäß ISO 11607-2  
- Dokumentation über CF-Card oder Computer-Anschluss möglich  
- Sparsam durch Energiesparfunktion  
- Schnell durch hohe Durchlaufgeschwindigkeit von 8 m/min.  
- Zusätzliche Sicherheit durch Siegelnahtbreite 14 mm  
- Integrierte Schnittstelle für Drucker, CF-Card-Printer oder PC  
- Relevante Parameter wie Druck, Zeit und Temperatur werden vom integrierten computergestützten Kontrollsystem erfasst und können über die RS 232-Schnittstelle archiviert werden

Art.-Nr. 350199

EUR  
1.979,00



GERÄTE-AUSRÜSTUNG

**Hygopac Plus**

Validierbares Durchlaufsigelgerät gemäß DIN EN ISO 11607-2 für die optimierte Versiegelung von Klarsichtsterilisierverpackungen. Siegeltemperatur, Anpressdruck und Siegelgeschwindigkeit lassen sich nachvollziehen und werden vom Gerät ständig erfasst, überprüft und gespeichert.

- intelligentes Validierungskonzept
- Prozesskontrolle anhand der wichtigen Siegelparameter Druck, Temperatur, Zeit
- Datenspeicherung auf SD-Karte oder im Praxis-Netzwerk, auch mittels Software
- hohe Siegelgeschwindigkeit (10 m/min)
- minimaler Platzbedarf
- intuitive Bedienung über das neue Gerätedisplay
- elegantes, funktionales Design
- wahlweise zur Wandmontage oder zur Aufstellung auf der Arbeitsplatte; kombinierbar mit und ohne Hygopac Plus Instrumententisch

Stück Art.-Nr. 627664

**Instrumententisch**

Stück Art.-Nr. 627663

**Folienhalter**

Stück Art.-Nr. 627662

EUR  
1.679,00

EUR  
169,00

EUR  
377,00

Abbildung enthält optionales Zubehör

Inklusive  
Montage-  
adapter!



**Lupenleuchte**

3 Dioptrien mit LED-Beleuchtung, beweglich durch flexibles Edelstahlrohr. Montageadapter für Klemmfuß, Wandhalterung, Tischfuß inklusive.

Stück Art.-Nr. 725929

EUR  
279,00

Die Lupenlampe ist dank modularem INOXKONZEPT® voll im Hygieneablauf integrierbar.



Anerkanntes,  
validierbares  
Kombinations-  
gerät



**Dentsply Sirona DAC Universal**

Das Kombinationsgerät reinigt, ölt und desinfiziert bis zu sechs Hand- und Winkelstücke und Turbinen, Ultraschallhandstücke und -spitzen, Düsen für Multifunktionsspritzen und Pulverstrahlgeräten sowie Pulverstrahlhandstücke.

**Ganz sicher**

- Vollautomatische, sichere Instrumentenaufbereitung
- Erfüllt die Anforderungen aus den Empfehlungen des RKI und BfArM\*

**Ganz sauber**

- Gründliche Außen- und Innenreinigung mit kaltem Wasser
- Spezialadapter für unterschiedliche Instrumentenhersteller

**Ganz schnell**

- Zeitersparnis und Kosteneffizienz auf Knopfdruck
- Bis zu 6 Instrumente können in ca. 15 Minuten aufbereitet werden – inklusive Kühlung

- DAC Universal inkl. Deckel Blue, Wasserfilter, Sterfilter, 1 Flasche NitramOil, Check & Clean Kit  
- Installationskit nach Wahl

Art.-Nr. 757912

EUR  
5.490,00

**Zubehör für Dentsply Sirona DAC Universal** Art.-Nr.

Nitram Oil #2 1 x 200 ml Dosen, weiß Wrapped Ready	325759	EUR 60,75
Nitram Oil 1 x 200 ml Dosen, weiß	432253	EUR 60,75
DAC Universal Abwasserfilter Packung: 6 Stück	758218	EUR 35,90
DAC Universal Reinigungstabs Packung: 50 Stück	750490	EUR 16,90

**Adapter-Vielfalt Deckel Green für Dentsply Sirona-Produkte** Art.-Nr.

Scaler Tip Adapter für alle Dentsply Sirona US-Tips	702687
Scaler TL Adapter für Teneo und Sinius	702685
Scaler L Adapter für Intego pro, C+ und M+	702818
Sprayvit 4000 Adapter für M1, C (o. Abb.)	702819
Sprayvit Adapter für Teneo Sinius, Intego pro, C+, M+	702686


**für EMS-Produkte** Art.-Nr.

Tip Adapter* für EMS Scaler- und Paro-Tips	733989
Piezon Handstück Adapter* für Handstücke EN-060, EN-061	741777
AIR-FLOW Handy 3.0 Düsen Adapter* für AIR-FLOW-Handy 3.0 EL-545, EL-542, EL-540	745803

**für Satelec-Produkte** Art.-Nr.

Handstück Adapter* für Satelec Slim	746955
Handstück Adapter* für Satelec Newtron	746954
Handstück Adapter* für Satelec Newtron LED	746956
Tip Adapter* für Satelec Scaler- und Paro-Tips	733990

\* zugelassenes Aufbereitungsverfahren für diese Produkte

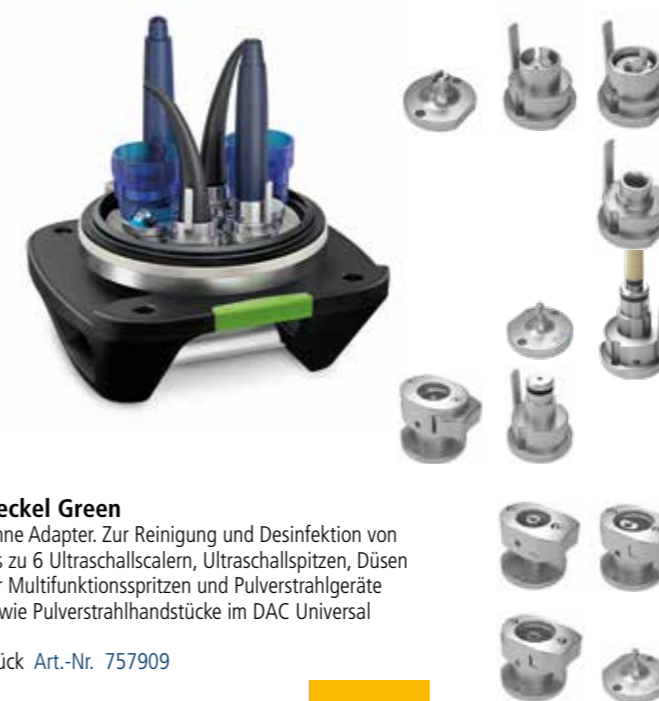

**Deckel Green**

Ohne Adapter. Zur Reinigung und Desinfektion von bis zu 6 Ultraschallscalern, Ultraschallspitzen, Düsen für Multifunktionsspritzen und Pulverstrahlgeräten sowie Pulverstrahlhandstücke im DAC Universal

Stück Art.-Nr. 757909

EUR  
540,00

EUR  
79,90



Abbildung enthält optionales Zubehör

**HYDRIM® C61WD LCS G4 Thermodesinfektor Tischgerät**

- EN 15883-1/-2 konform
- mit Aktivlufttrocknung, Rollwagen und Dosierpumpe für flüssigen Reiniger
- platzsparend – Reinigungslösung integriert
- netzwerk- und internetfähig
- Prozessdokumentation über USB oder Netzwerk möglich

**Im dental bauer Paket enthalten:**

- HYDRIM® Tischgerät C61 LCS G4 mit Winkelstückaufbereitung
- Paket Reiniger
- LCS-System (Schiene für Innenreinigung 8x)
- Adapter nach Wahl (7 Stück Intramatic/Turbine)
- ZEG-Adapter mit Halterung (5 Plätze inkl. Schlüssel)
- Vertikalkorb für stehende Instrumente
- Gestell für Körbe (2 Ebenen-Beladung)
- Korb Statim 2000 (zwei offene Siebkörbe)
- Korb (untere Ebene zur Beladung, offen)

\* abgebildetes Instrumentarium nicht im Preis enthalten.

Art.-Nr. 642477

EUR  
6.490,00



**STATIM® 5000 G4 Kassettenautoklav**

Durch die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Kapazität zeichnet sich der STATIM® 5000 G4 als Zusatzgerät zum Klasse B Autoklav aus. Die herausnehmbare Kassette bietet die Möglichkeit, größere Mengen mit kurzen Zykluszeiten zu sterilisieren – für unverpackte sowie verpackte Hohlkörper-Instrumente. Über das One-Touch-Tastenfeld des STATIM® können Sie zwischen vier vollautomatischen Sterilisation programmen wählen.

- 8:45-Minuten-Zyklus für unverpackte Festkörper-Instrumente
- 15:30-Minuten-Zyklus für verpackte Instrumente (kritisch B)
- Dri-Tec-Trocknungstechnologie
- Steriler Transport von Instrumenten
- Geringere Ausgaben für Instrumente
- Schonende Behandlung der Instrumente
- EN13060 normkonform, nachweislich auch für kritische Instrumente, wie z. B. Hand- und Winkelstücke geeignet
- Validierbar
- Integrierter Datalogger
- Prozessdokumentation möglich, Netzwerk und internetfähig

Art.-Nr. 423310

EUR  
5.290,00



**D-LIGHT® PRO LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge**

Die D-Light Pro bietet nicht nur eine effiziente Lichthärtung, sondern hilft Ihnen, Bakterien sichtbar zu machen. Die D-Light Pro ist autoklavierbar und sorgt damit für maximale Hygiene – zum optimalen Schutz des Patienten.

- 3 Modi: aushärten, schützen, erkennen
- duale Wellenlänge (blau, violett)
- elegantes, leichtes, schlankes Design
- Ladestation mit zwei Wechselakkus
- Handstück und Lichtleiter autoklavierbar

Art.-Nr. 736802

EUR  
799,00



**Ultraschall-Reinigungssystem BioSonic® UC150**

- 5,7 Liter Edelstahltank
- Individuell einstellbare Funktionen
- Bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät
- Heizfunktion (25 – 60 °C) – Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- Handschuhfreundlicher Touchscreen

**Technische Daten**

- Außenmaße: 34,5 x 27,6 x 35,5 cm
- Tankmaße: 28,7 x 16,0 x 17,8 cm
- Max. Leistung von 160 W (ohne Heizung) und 440 W – 560 W (mit Heizung)
- Betriebsfrequenz: 45 – 47,5 kHz

Stück Art.-Nr. 738906

EUR  
969,00

**Zubehör für BioSonic®**

UC150 Zubehör Kit 1 Korb, 2 Bechergläser, 2 Deckel, 2 Positionsringe, 2 Positionrahmen	Art.-Nr. 738909	EUR 229,90
UC150 Kassettenkorb	Art.-Nr. 738907	EUR 145,00
600-ml-Becherglas mit Deckel und Positionsring	Art.-Nr. 404513	EUR 24,90
Positionsrahmen	Art.-Nr. 738908	EUR 23,90



**HYGOSONIC**

Beheizbares Ultraschallgerät, mit einem Wannenvolumen von 2,75 Liter für die schnelle und gründliche Reinigung von Instrumenten, Hilfsmitteln, Prothesen etc. Mit Zusatzfunktionen zur Unterstützung bei der Anwendung, z.B.: „Degas-Funktion“ zur Entfernung störender Gasbläschen aus der zum Einsatz kommenden Flüssigkeit. Das Instrumentarium kann zusätzlich durch Einsatz der ID-/MD- Produkte aus der Dürr System Hygiene sicher desinfiziert werden.

- Technische Daten**
- Spannung 220 – 240 V
  - Frequenz 50/60 Hz
  - Gewicht 3,3 kg
  - 21,4 x 30 x 17,9 cm

Stück Art.-Nr. 476658

EUR  
699,00

**Zubehör für Hygasonic**

Deckel, Kunststoff	Art.-Nr. 375230	EUR 28,00
Einsatzkorb, Edelstahl	Art.-Nr. 375625	EUR 48,00
Tauchkorb, Edelstahl	Art.-Nr. 377026	EUR 42,00

Glasset, bestehend aus: 2 Bechergläsern  
à 600 ml, je mit Deckel und Gummihaltering,  
inkl. Lochblech-Tablett Art.-Nr. 378464

EUR  
66,00







TESTVERFAHREN



**Omni Wash-Test**

Zur Überprüfung der Desinfektionsleistung (Funktions-test) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme als auch eine ggf. entstandene Über-/Unterdosierung. Zwingend erforderlich zur Validierung Ihres Thermodesinfektors. Die separat erhältliche Omni Wash-Test-Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash-Tests und zur Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung.



EUR  
48,90  
Prüfleiste

Prüfleiste  
Art.-Nr. 706280  
Indikatorplättchen, 100 Stück  
Art.-Nr. 705879

EUR  
159,80  
Indikatoren



**Omni Bowie & Dick-Test**

Einmaltestpaket für den täglichen Bowie & Dick-Test im Dampfautoklaven nach DIN EN 13060 (Klasse B).

Stück Art.-Nr. 712536

EUR  
3,90



**Omni Helix-Test**

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle B Autoklaven. Der Testkörper ist nach 250 Zyklen auszutauschen.

Packung: 1 Testkörper, 300 Teststreifen  
Art.-Nr. 347050

EUR  
105,70

Für Ihr  
Folienschweiß-  
gerät

**Omni Seal-Test**

Omni Seal-Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 6 mm und Funktionsbeurteilung.

Packung: 100 Seal Tests  
Art.-Nr. 347045

EUR  
30,90



**Omni Ink-Test**

Einmal-Testpipetten zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest). Für Sterilgutbeutel mit Seitenfalte.

Packung: 30 Pipetten  
Art.-Nr. 727492

EUR  
31,80



**3M™ Indikator Dentsply Sirona DAC Universal**

Klasse 5 Chemoindikator zur Kontrolle der korrekten Funktionsweise des Sirona DAC Universal Sterilisators. Befestigen Sie den Indikator im Klammerhalter und diesen am Deckel des DAC. Chemoindikator, der im Anzeigeverhalten einem Bioindikator entspricht; der Farbumschlag verläuft parallel zur Absterbekurve eines biologischen Indikators. Erfüllt ISO 11140-1 sowie EN 867-1 und EN 867-2.

Packung, 100 Test-Indikatoren  
Art.-Nr. 356747

EUR  
55,90



**Dentsply Sirona DAC Universal-Halter für Indikator**

Packung: 1 Klammerhalter  
Art.-Nr. 319801

EUR  
33,90

**Dentsply Sirona DAC Universal Sporentest**

Prüfkörper (PCD) für den Dampfdringungstest. Es können chemische und biologische Indikatoren in den Prüfkörper eingelegt werden, um routinemäßig die Sterilisationsleistung im Inneren der Instrumente zu kontrollieren. Als wöchentliche Routinekontrolle durchzuführen.

Stück Art.-Nr. 439568

EUR  
117,90



**Dentsply Sirona DAC Universal ISO/INTRAmatic-Adapter**

Adapter für Deckel „Standard“ am DAC Universal. Zur Montage des Prüfkörpers Sirona DAC Universal Sporentest auf dem Sirona DAC Deckel „Standard“ ist ein Adapter ISO/INTRAmatic erforderlich.

Stück Art.-Nr. 654826

EUR  
81,90



**Medisafe „MediCheck Proteinschnelltest“**

Test zum Nachweis von Resteiweißen auf Oberflächen von Instrumenten oder RDGs, Ultraschallgeräten, Sirona DAC etc. Dieser Test gewährleistet einfache Anwendung und höchste Sensitivität mit Inkubation. Das Resultat liegt in 15 Minuten vor.

- Empfehlung von Sirona: wöchentliche Anwendung im DAC
- Sensitivität von 10 µg Restprotein bei Raumtemperatur und 1 µg Restprotein bei Inkubation
- klarer Farbumschlag, konform zur EN 15883
- angefeuchteter Tupfer

Packung, 25 Stück Art.-Nr. 652535

EUR  
190,00



**SteamSensor S**

Spezielles chemisches Indikatorsystem zur Überwachung der Dampfsterilisation nach DIN EN ISO 11140-1 Klasse 5 zur Überwachung der Sterilisationszyklen N und S (z.B. DAC Universal, Statim-Kassettenautoklaven, Euroklav, Schnellprogramme etc.)

Packung: 200 Stück Art.-Nr. 744916

EUR  
28,80



**Bowie & Dick-Test**

134 °C/3,5 Minuten täglicher Funktionstest für Dampfsterilisatoren nach DIN EN 13060, DIN EN ISO 17665.

Packung: 15 Stück Art.-Nr. 545498

EUR  
75,90



**Wash-Sensor Protein**

Wash-Sensor Protein ist eine einfache, routinetaugliche Nachweismethode von Proteinrückständen auf den Oberflächen von medizinischen Instrumenten/ Medizinprodukten.

Packung: 5 Stück Art.-Nr. 412421

EUR  
39,90



**Wash-Sensor RDG Prüfkörper & Indikatorplättchen**

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG).

Prüfkörper  
Art.-Nr. 406968  
Indikatorplättchen, 100 Stück  
Art.-Nr. 482156

EUR  
42,90  
Prüfkörper

EUR  
195,00  
Indikatoren



**Wash-Sensor U Prüfkörper & Indikatorplättchen**

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Ultraschall-Reinigungsgeräten.

Prüfkörper  
Art.-Nr. 406968  
Indikatorplättchen, 100 Stück  
Art.-Nr. 396076

EUR  
42,90  
Prüfkörper

EUR  
195,00  
Indikatoren

**Wash-Sensor H Dental Prüfkörper & Indikatorplättchen**

Indikatorsystem zur Prüfung der Reinigungswirkung in Hohlkörper Instrumenten wie Turbinen, Hand- und Winkelstücke im RDG. Der Wash-Sensor H Dental Prüfkörper muss, je nach Gerätetyp, mit einem speziellen Adapter bestellt werden.

Indikatorplättchen,  
100 Stück Art.-Nr. 545497

EUR  
179,00  
Indikatoren



**Adaptervarianten:**

**Melag und Miele:**

Der Wash-Sensor H Dental Prüfkörper kann mit montiertem Adapter direkt in die Injektorschiene mit Zentralfilter eingeschraubt werden.  
Prüfkörper + Adapter Art.Nr. 750695

EUR  
129,60

**Miele:**

Der Wash-Sensor H Dental Prüfkörper mit montiertem Adapter kann direkt in die einzel Silikonadapter von Miele für Übertragungsinstrumente bei Nutzung der Aufnahme 1 (AUF 1) oder 2 (AUF 2) eingesteckt werden.

Prüfkörper + Adapter mit 16 mm Außendurchmesser Art.-Nr. 754480  
Prüfkörper + Adapter mit 20 mm Außendurchmesser Art.-Nr. 753291  
Prüfkörper + Adapter mit 22 mm Außendurchmesser Art.-Nr. 754481

weitere Adapter auf Anfrage

EUR  
123,90  
16 mm

EUR  
134,90  
20 mm

EUR  
135,90  
22 mm



**MELAcontrol und MELAcontrol PRO sind Prüfkörper nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Funktionsprüfung von Klasse B-Autoklaven. Beide Prüfsysteme ermöglichen eine sichere Bewertung der Sterilisation.**



**MELAcontrol® – Praxis-Set**

Set besteht aus: 1 Prüfkörper (Helix) und 250 Stück Indikatorstreifen. Bei MELAcontrol werden die 250 Teststreifen stets mit einem neuen Prüfkörper geliefert.

Set Art.-Nr. 399168

EUR  
149,90



**MELAcontrol® – PRO**

Set besteht aus: 1 Prüfkörper (Helix) und 40 Indikatorstreifen. Bei MELAcontrol PRO wird der Prüfkörper einmalig angeschafft, die Teststreifen können kostengünstig nachbestellt werden.

Stück Art.-Nr. 361408

EUR  
189,90



**Hygobox**

Robuste, widerstandsfähige Desinfektionsbox mit einem Fassungsvermögen bis zu 3 Liter. Füllanzeige für 1, 2 und 3 Liter. Geeignet für die Tauchdesinfektion und Reinigung von Instrumenten oder von bis zu 6 Abformungen sowie prothetische Arbeiten. Sicherer Transport durch ergonomisch geformte Tragegriffe. Kippsichere Abtropfposition für den Siebeinsatz. Maße (H x B x T): 13 cm x 32,5 cm x 21 cm

Stück Wanne grau  
Siebeinsatz weiß  
Deckel blau Art.-Nr. 415607

EUR  
46,50

**Aufkleber Desinfektionswannen**

Aufkleber zum Beschriften von Desinfektionswannen

Packung, 4 Stück Art.-Nr. 442459

EUR  
3,90

**Dürr Abdruck-Desinfektionsdose**

Abdruck-Desinfektionsdose zur Tauchdesinfektion und Reinigung mit MD 520 in nur 5 Minuten. Spezielle Aufhängevorrichtung für max. 2 Abformlöffel. Maße: H 18,5 cm, Ø 11,8 cm

Stück Art.-Nr. 340148

EUR  
16,90



**Touchless mini  
Automatisches Wandspendersystem**

Automatischer Spender für flüssige Medien (Seife, Desinfektionsmittel, Gel, Lotion), einstellbar in 4 Dosiermengen (2 – 6 ml) mit Einwegpumpe, passend für alle Seifen und Händedesinfektionslösungen.

Stück Art.-Nr. 752686

EUR  
129,90

**Austauschpumpe für  
„Touchless mini“ Spendersystem**

Kunststoffeinwegpumpen. Die Pumpen können bei Bedarf (spätestens nach 6 Monaten) kostengünstig getauscht und danach Sortengerecht entsorgt werden.

Stück Art.-Nr. 752688

EUR  
2,60



**Skalpellklingen-Entfernungsbox**

Zum sicheren Abnehmen und Sammeln von gebrauchten Skalpellklingen (für ca. 100 Stück)

Stück Art.-Nr. 416856

EUR  
6,50



**Endo Guard Zirc**

Endo Guards organisieren alle manuellen oder maschinellen Endoinstrumente. Der verschiebbare Slide-Adapter ermöglicht die sichere Dokumentation der Benutzungshäufigkeit der Instrumente. Jeweils integriert ist eine Messlehre und Ablageschwämme. Endo Guards sind autoklavierbar. Abmessung: 14,1 cm x 1,3 x 5,1 cm, Farbe neonblau

Stück für 11 Maschinen- und 5 Handinstrumente  
Art.-Nr. 392042  
Stück für 16 Handinstrumente  
Art.-Nr. 344480

EUR  
35,70  
pro Artikelnr.

**Transport- und Materialwanne**

Die Transport- und Materialwanne ermöglicht sicheren Transport vom Hygienebereich zum Behandlungszimmer und zurück. Eine verriegelbare Abdeckhaube sichert zusätzlich den geschlossenen und geschützten Transport. Desinfizierbar.

Materialwanne: 31,1 cm x 27,6 cm x 7,0 cm, autoklavierbar 136 °C, antimikrobieller Schutz, Farbe blau, Verriegelbare Abdeckhaube: 32,4 cm x 30,0 cm x 3,5 cm, Farbe Transparent

EUR  
22,40  
Mat.-wanne

Materialwanne Art.-Nr. 476935  
Abdeckhaube Art.-Nr. 477034

EUR  
21,90  
Abdeckhaube

Steri Bur Guard Halter erleichtern die Organisation und Zuordnung aller rotierenden Instrumente. Bohrer oder Fräsen werden während der Wiederaufbereitung sicher fixiert. Der Halter schützt Ihre Bohrer nicht nur während der Reinigung und der Sterilisation, sondern kann auch in drei verschiedenen Winkeln aufgestellt werden, um am Behandlungsplatz einfachen Zugriff zu haben.



**Steri Bur Guard 22 Loch**

Steri Bur Guard für 22 Bohrer  
Farbe blau, autoklavierbar

Stück Art.-Nr. 455898

EUR  
18,00



**Steri Bur Guard 12 Loch**

Steri Bur Guard für 12 Bohrer  
Farbe blau, autoklavierbar

Stück Art.-Nr. 466829

EUR  
17,80



**Steri Bur Guard 12 Loch chirurgisch**

Steri Bur Guard für 12 hohe chirurgische Instrumente  
Farbe grau, autoklavierbar

Stück Art.-Nr. 385448

EUR  
18,40



**Omni-Z Wandspender**

Der ideale Spender für Ihre Omni-Z Einmal-Falt-Handtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße (B x H x T): 28 cm x 38 cm x 13 cm Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Spezialschlüssel.

Wandspender Stück Art.-Nr. 442193

EUR  
23,90



**Omni-Sensorspender**

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße (H x B x T): ca. 39 cm x 32 cm x 21 cm Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff, 2-lagig in TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

Rollenspender Stück Art.-Nr. 699629

EUR  
106,50



**Liftbox Desinfektionswanne**

Desinfektionsbox für Instrumente und Abdrücke. Das Sieb-Tray wird beim Schließen des Deckels in die Desinfektionslösung abgesenkt. Tray mit schwenkbarem Griff für einfaches Handling, kein direkter Hautkontakt mit Desinfektionsmitteln, säurebeständiger Kunststoff. Maße: B ca. 26 cm x H 8,5 cm x T 12 cm

Stück, Inhalt: ca. 1,5 Liter Art.-Nr. 310959

EUR  
19,90

**Miramatic® Holder Plus**

Stabiler Sicherheitsständer für Injektionsspritzen und Spülkanülen. Vermeidet Verletzungsgefahr durch Nadeln, die offen auf dem Schwebetisch liegen, Ein-Hand-Recapping verringert Verletzungsrisiko, Spritze steht senkrecht in eigener Schutzhülle, Feststellklemme hält Schutzhülle sicher fest. Edelstahl, ca. 220 g schwer.

Stück Art.-Nr. 300485

EUR  
35,60



**Reinigungsbürste**

Nylon-Reinigungsbürste zur schonenden Reinigung von Instrumenten und Bohrern.

Stück Art.-Nr. 654845

EUR  
1,60



**Desinfektionswanne**

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Maße (B x H x T): außen 32 cm x 21 cm x 2,5 cm innen 24,5 cm x 15,5 cm x 10 cm

Stück Art.-Nr. 424187

EUR  
24,50



**Omnistar**


Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem weiß oder eleganter Chromoptik. Wahlweise für 500 ml oder 1 Liter Eurospenderflaschen. Geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle. Flexible Dosiermengen, einfach einstellbar. Für Flüssigkeiten und Gels. Inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale. Obere Abdeckung ist zu öffnen, um die Pumpe zu entnehmen oder die Dosiermenge einzustellen. Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall.

Abmessung (B x H): 105 mm x 320 mm  
Inklusive Tropfschale, Sichtblende montiert, Wandhalterung und Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflaschen.

Stück weiß Art.-Nr. 627359  
Stück Chromoptik Art.-Nr. 627470

EUR  
44,90  
weiß

EUR  
60,90  
Chromoptik

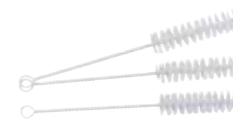

**Mirasuc® Bürste**

Reinigungsbürste für Absaugkanülen. Biegsam, ideal zur Innenreinigung der Kanülen. Für alle Absaugkanülen mit Ø 11 mm und Ø 16 mm.

Packung: 6 Stück Art.-Nr. 393166

EUR  
5,90



**Klipp-Klapp-Siebzange für Kleinteile**

Siebzange aus Edelstahl für Kleinteile wie Bohrer. Praktisch zum Einhängen in das Ultraschallbad, um empfindliche Kleinteile sicher abzubrühen. Siebe Ø 45 mm

Stück Art.-Nr. 412767

EUR  
4,90



**BD-Steribox Bohrerbad Desinfektion**

Behälter für die Desinfektion. Praktisch für Kleinteile wie Bohrer, Diamanten, mit Öffnung im Deckel, herausnehmbarem Sieb zum Abspülen des Inhalts. Autoklavierbar. Maße: Gesamthöhe ca. 12 cm, Ø ca. 8 cm Kunststoff, Farbe weiß

Stück Art.-Nr. 390227

EUR  
5,95



Praxis-  
hygiene von  
Anfang an:  
Eingangsdeseinfektion

**Infra Hygiene Station mit Standfuß**

Die Komplett-Lösung für Ihren Eingangsbereich. Durch die Kombination mit dem Bildschirm und dem LED-Lichtreflektor ein absolutes Highlight. Ideal für die berührungsfreie Ausgabe von Händedesinfektion, herstellerunabhängige Verwendung von Euroflaschen bis 1000ml und hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche. Die Hygienestation kann nur in Kombination mit einem Sensorspender der Serie IT 1000 bestellt werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe: Anthrazit, pulverbeschichteter Stahl  
Maße: (B x H x T)  
ca. 450 mm x 16000 mm x 450 mm

Art.-Nr. 762711

EUR  
199,00



**Sensor-Spender IT 1000 Euro 2**

Berührungsloser, sensorgesteuerter Spender zur Ausgabe von Desinfektionsmittel, Seifen und dünnflüssigen Cremes von nahezu jedem beliebigen Hersteller für EURO-Flaschen bis 1 Liter Gebindegröße.

Abmessung (B x H x T):  
112 mm x 362 mm x 123 mm.  
IT 1000 Euro 2, Material Kunststoff.  
Darstellung mit Sichtfenster zur Inhaltserkennung (ohne Acryl-Scheibe, separat bestellbar).  
Stück, inklusive Flaschenadapter, Universal-Dosierpumpe, Batterie-Set

- weiß, Stück Art.-Nr. 753512
- blau, Stück Art.-Nr. 762623
- rot, Stück Art.-Nr. 762621
- orange, Stück Art.-Nr. 762624
- grün, Stück Art.-Nr. 762620
- gelb, Stück Art.-Nr. 762622
- schwarz, Stück Art.-Nr. 763400

EUR  
152,00  
weiß



EUR  
157,00  
andere Farben

schülke →



**Spender Typ KH touchless**

Für die berührungslose Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen für 1.000 ml Einwegflaschen. Dosierte die benötigten Präparate über einen Dosierblock an der Dosierpumpe in Mengen von ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub. Die austauschbare Pumpe aus Edelstahl sichert störungsfreien Präparatfluss, kein Verstopfen, Verkleben oder Nachtropfen. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium und Armhebel aus Edelstahl. Manuelle Bedienung durch Notbügel bei Batterieerleand, niedriger Energieverbrauch ermöglicht eine lange Batterielaufzeit (bis zu 2 Jahre)  
Maße (B x T x H): 9,2 cm x 21,0 cm x 29,0 cm

Spender Art.-Nr. 425386  
Schalenhalter Art.-Nr. 706605

EUR  
195,00  
Spender

EUR  
39,50  
Schalenhalter



**hyclick® Spender System**

Flaschen mit integrierter Pumpe. Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.

- Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel somit weniger Aufwand, Aufbereitung des Spendersystems entfällt
- Erstöffnungs- und Transportsicherung für schnelle Unterscheidbarkeit und mehr Sicherheit
- „Non-Removal“ Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Flasche und Pumpe sind fest verbunden, das bietet maximalen Kontaminationsschutz
- Minimaler Reinigungsaufwand dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml
- Einfache Montage auf gängigen Wandhalteplatten
- für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotion für 500 ml oder 1000 ml hyclick®-Flaschen
- Erfüllt die DGKH/RKI Empfehlungen

Spender für 1 Liter/Stück Art.-Nr. 724850

EUR  
20,90  
Spender



**Mediboxen Kanülensammler & Abfallentsorgung**

Medibox Kanülensammler zur sicheren Entsorgung von spitzen, scharfen und kontaminierten medizinischen Instrumenten.

- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Für die Entsorgung von Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
- Die Medibox® 0,7 L verfügt über Halterungen von Penkanülen-Schutzkappen
- Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spritzer medizinischer Instrumente
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Temporär und endverschießbar
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Behälter und Deckel aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei 134 °C für bis zu 18 Minuten (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907 (gilt nicht für die Medibox® 0,7 Liter)
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

Karton mit 10 Stück á 0,7 Liter  
Art.-Nr. 324296

EUR  
18,90  
Karton

Stück á 2,4 Liter  
Art.-Nr. 753518

EUR  
1,69  
Stück á 2,4 Ltr.

Stück á 4,7 Liter  
Art.-Nr. 753519

EUR  
3,10  
Stück á 4,7 Ltr.



**Wandspender Plus ELS, langer Arm**

- mit Armhebelbedienung
- Aluminiumgehäuse, autoklavierbar
- Kunststoffpumpe
- leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich
- inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung
- einstellbare Dosierung ca. 1,5 ml / 1 ml / 0,7 ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes
- zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
- die neue Generation Wandspender plus ist auch geeignet für die Förderung von Pflegelotionen

Stück, 500 ml Art.-Nr. 600498  
Stück, 1000 ml Art.-Nr. 600497

EUR  
50,90  
500 ml

EUR  
50,90  
1000 ml



Kanülensammler: nach TRBA und UN3291 geprüfter Sicherheitsbehälter für die einfache Entsorgung gebrauchter Kanülen. Universale Abzieh/ -Abdrehvorrichtung für alle gängigen Kanülentypen. Nach DIN ISO 23907 zertifiziert.

**Multi-Safe twin Box**

	Art.-Nr.	
Multi-Safe opti 500 T Box 500 ml Volumen, Stück	301975	EUR 1,30
Multi-Safe twin Box 700 ml Volumen, Stück	318895	EUR 1,40
Multi-Safe twin Box 1,8 Liter Volumen, Stück	318911	EUR 1,00
Multi-Safe twin Box 2,1 Liter Volumen, Stück	318917	EUR 1,60
Multi-Safe twin Box 3 Liter Volumen, Stück	303541	EUR 1,85
Multi-Safe twin Box 5 Liter Volumen, Stück	303563	EUR 3,90



**Eltra® 40 Desinfektionsvollwaschmittel**

- Desinfektionsvollwaschmittel bei 40 °C
- gelistet für die chemothermische Wäsche-desinfektion bei 40 °C gemäß RKI und VAH
- hervorragende Waschleistung und Fleckentfernung bei 40 °C
- gibt der Wäsche einen hygienisch frischen Duft
- wäscht, desinfiziert und entfernt Flecken faserschonend
- wirksam gegen alle Viren, Bakterien und Pilze einschließlich MRSA, Tuberkuloseerreger, HIV, Hepatitis Noro-Rotavirus, Grippeerreger, SARS



Packung, 8,3 kg Art.-Nr. 733640

EUR  
73,40  
Packung 8,3 kg

**Eltra® 60 Desinfektionsvollwaschmittel**

- Desinfektionsvollwaschmittel bei 60 °C
- gelistet für die chemothermische Wäsche-desinfektion bei 60/70/80 °C gemäß RKI (AB) und VAH
- zum Waschen und Desinfizieren von hygiene-sensiblen Textilien
- hervorragende Waschkraft bereits bei 60 °C
- wirksam gegen alle Viren, Bakterien und Pilze einschließlich MRSA, HIV, Hepatitis, Norovirus und andere Erreger viraler Durchfallerkrankungen
- wäscht, bleicht und desinfiziert zugleich, entfernt Flecken faserschonend
- gegen Eiweiß- und Stärkeverschmutzungen biologisch wirksam



Karton, 6 kg Art.-Nr. 302763  
Sack, 20 kg Art.-Nr. 358766

EUR  
31,50  
Karton 6 kg

EUR  
97,90  
Sack 20 kg



AESCULAP



**Instrumenten Ölspray  
Aesculap Pflegeöl Sterilität**

- verringert Reibung und schützt gegen Reibkorrosion
- gewährleistet gute Gleit- und Schmiereigenschaften
- physiologische Unbedenklichkeit geprüft nach ISO 10993
- berücksichtigt Umweltaspekte (FCKW-frei)
- geeignet für Dampfsterilisationsverfahren nach ISO 13683 und Heißluftsterilisation bis max. 180 °C
- Durch eine spezielle Rezeptur ist gewährleistet, dass auch in schwer zugänglichen Stellen der Wasserdampf während des Sterilisiervorganges den Ölfilm durchdringt.

Dose, 300 ml Art.-Nr. 437569

EUR  
8,99



**Instrumenten Öl-Tropfenflasche  
Aesculap Sterilität Pflegeöl**

- Alle Sterilität-Pflegeöle sind für Dampfsterilisations-Verfahren validiert (nach EN 554/ISO 13683) und zur Heißluftsterilisation bis max. 180 °C geeignet. Sie werden vor der Sterilisation angewendet.
- verringert Reibung und schützt gegen Reibkorrosion
  - gewährleistet gute Gleit- und Schmiereigenschaften
  - physiologische Unbedenklichkeit geprüft nach ISO 10993
  - Durch eine spezielle Rezeptur ist gewährleistet, dass auch in schwer zugänglichen Stellen der Wasserdampf während des Sterilisiervorganges den Ölfilm durchdringt.
  - FCKW und silikonfrei, keine Flecken- und Krustenbildung auf Instrumentenoberflächen

Stück, 50 ml Art.-Nr. 446729

EUR  
5,80

schülke →



**mikroqid® universal wipes premium  
mikroqid® universal wipes premium maxi**

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Alkoholische Schnelldesinfektion in allen Bereichen und für wischbare Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko, den Erfordernissen kurzer Einwirkzeiten und guter Materialverträglichkeit angepasst, wie z. B.
- patientennahe Flächen, Behandlungseinheiten, Oberflächen medizinischer Geräte
  - Tastaturen und Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z. B. Smartphones und Tablets
  - sehr gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), exzellente Reinigungsleistung
  - wirksam nach EN 16615 (4-Felder-Test) in einer Minute
  - dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe
  - schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sekunden)

mikroqid® universal wipes premium  
(100 Tücher, 20 cm x 20 cm) Reichweite: ca. 1,0 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 723218

EUR  
9,10  
100 Tücher

mikroqid® universal wipes premium maxi  
(80 Tücher, 25 cm x 25 cm) Reichweite\*: ca. 1,5 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 737145

EUR  
9,90  
80 Tücher

ALPRO  
ALPRO MEDICAL GMBH



**Sterilfilter**

- Zur Anwendung am Wasserhahn. Der Perlator ist durch den entsprechenden Adapter (Innen- oder Außengewinde) zu ersetzen.
- Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
  - Schutz für immungeschwächte oder immunsupprimierte Patienten vor wassergebundenen, pathogenen Keimen
  - schnelle und sichere Installation
  - Medizinprodukt Klasse I, sterilisiert
  - Bakterienrückhalt > 7 log pro cm<sup>2</sup>

2 Filter pro Karton  
Art.-Nr. 740637

EUR  
198,00

**Zubehör:**  
Innengewinde M22 IG  
Art.-Nr. 741795

Außengewinde M24 AG  
Art.-Nr. 754254

EUR  
59,00  
je Gewinde



**AlproJet MixCup**

Multifunktionsbehälter zur Reinigung und Pflege der Absauganlage. Anmisch-, Absaug- und Ausgießbehälter in einem. Absaugansätze geeignet für alle Schlauchsysteme. Optimierte Gestaltung der Ansaugstützen. Sorgt für einen größeren Flüssigkeitsdurchsatz und eine stärkere Reinigungswirkung. Einfach in der Handhabung. Sicherer Stand auch bei Belastung.

Art.-Nr. 337538

EUR  
26,90

ALPRO  
ALPRO MEDICAL GMBH



**SteriCleaner**

SteriCleaner ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung der Sterilisationskammer, von Instrumententablets und Stahloberflächen. SteriCleaner entfernt selbst festsitzende Rückstände ohne große Probleme aus der Sterilisationskammer und von den Instrumenten und Trays äußerst materialschonend.

Flasche, 500 ml Art.-Nr. 412594

EUR  
10,90



**IC 100**

Gebrauchsfertiger Reinigungsschaum, besonders materialverträglich, zur intensiven nicht proteinfixierenden Vorreinigung von Instrumenten. Löst Proteinrückstände, Gewebe und andere Körperflüssigkeiten von Oberflächen der Instrumente. Verhindert Korrosion an Stahl und Edelstahl. Verhindert das Antrocknen von Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente, optimal bei Trockenlagerung von Instrumenten.

Flasche, 500 ml Art.-Nr. 627295

EUR  
16,50



**AlproZyme – Alkalisches-enzymatisches Reinigungsgranulat**

zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von zahnärztlichen Instrumenten und rotierenden Präzisionsinstrumenten. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs-, Desinfektionsgeräten.

- Entfernt kraftvoll und materialschonend Proteine, Geweberückstände, Biofilm etc. von Oberflächen der Instrumente.
- Getestet nach ISO/TC 198/WG 13 Kap.6.2
- Hoher Personalschutz (TRBA 250), viruzid nach DVV „high level“ gegen unbehüllte Adeno-, Noro- und Parvoviren sowie behüllte Viren wie HBV, HCV, HIV, Influenza bei 1%iger Anwendung, vor der umfassenden Desinfektion
- Alprozyme ist ein Granulat und wird erst durch das Ansetzen mit warmem Wasser aktiv.
- Es hat eine herausragende Materialverträglichkeit, greift keine Instrumente an und kann somit über Nacht verwendet werden. Gerade bei der Verwendung von einem RDG ist dies von Vorteil, um die Instrumente einzulegen wenn am Abend der RDG nicht mehr gestartet wird.

Klinikpackung:, 100 Beutel a. 10 g Art.-Nr. 303647

EUR  
61,90

ALPRO  
ALPRO MEDICAL GMBH



**AlproJet-D**

Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäumendes Flüssigkonzentrat für die tägliche Reinigung, Desinfektion und Pflege von zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Wirkt bakterizid, levurozid und viruzid (HCV, BVDV). Frei von Phenolen, Aldehyden, Phosphaten und Chlor! Sehr gute Materialverträglichkeit. Anwendung: 5%ig. Biologisch abbaubar (gemäß OECD-Richtlinien), VAH zertifiziert.

Dosierflasche, 1 Liter  
Art.-Nr. 306557

EUR  
8,90  
Flasche 1 l

Kanister, 10 Liter  
Art.-Nr. 381254

EUR  
46,90  
Kanister 10 l



**AlproJet-DD**

Hochkonzentriertes aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat für die tägliche Reinigung, Pflege und Desinfektion aller zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Quartäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten, VAH zertifiziert.

Dosierflasche, 1 Liter  
Art.-Nr. 627296

EUR  
13,50  
Flasche 1 l

Kanister, 5 Liter  
Art.-Nr. 340085

EUR  
65,90  
Kanister 5 l



**AlproJet-W**

Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäumendes Flüssigkonzentrat für die wöchentliche Kontrareinigung und Pflege von zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Sehr gute Materialverträglichkeit. Wirkt reinigend und in Kombination mit AlproJet-D desinfizierend. Quartäre Ammoniumverbindungen.

Dosierflasche, 1 Liter  
Art.-Nr. 306565

EUR  
8,90  
Flasche 1 l

Kanister, 5 Liter  
Art.-Nr. 381238

EUR  
26,90  
Kanister 5 l



### Omniclean T-Ölspray

T-Ölspray zur Pflege von Sirona Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen, Köpfen und Spannzanze

Dose, 250 ml Art.-Nr. 430185

EUR  
13,70



### Omniclean Universal Ölspray

Universal-Ölspray zur Pflege von Hand- und Winkelstücken, Köpfen, Spannzanzen und Turbinen sowie Luftmotoren

Dose, 500 ml Art.-Nr. 429876

EUR  
11,80



### Omni ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

Flasche, 750 ml Art.-Nr. 403641

EUR  
4,80



### Omniclean Drill

Bohrerbad, hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inkl. Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHH-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHH: Konz.: 15 Minuten inkl. HBV/HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Flasche, 2 Liter Art.-Nr. 346947  
Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 346810

EUR  
8,90  
Flasche 2 l

EUR  
38,50  
Kanister 10 l



### Ultra Orange

Reiniger für Praxis und Labor. Mischung aus natürlichen schalengepressten Orangenölen. Hohe Reinigungskraft und angenehm duftend. Spezialreiniger zur Entfernung von Zement, Alginat- und Gipsresten auf Abdrucklöffeln, Anmischbesteck, Glasplatten, Keramik und Kronen/Brücken.

Flasche, 250 ml Art.-Nr. 320714

EUR  
4,90



### Adapter Winkelstück-Turbinenköpfe

Adapter Winkelstück-Turbinenköpfe ISO 9168, für Universal-Ölspray und T-Ölspray

Stück Art.-Nr. 430601

EUR  
1,60



### Omnifol Sterilisationsfolien

Einmal-Sterilisationsfolien. Getönt Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator. Spezialpapier, einrissfeste Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.

Rolle 200 mm x 55 mm x 100 mm (für Trays)

Art.-Nr. 385973

Rolle 100 mm x 200 mm

Art.-Nr. 348833

Rolle 75 mm x 200 mm

Art.-Nr. 348818

Rolle 50 mm x 200 mm

Art.-Nr. 348811

EUR  
48,90  
Omnifol 200

EUR  
24,50  
Omnifol 100

EUR  
18,70  
Omnifol 75

EUR  
16,30  
Omnifol 50



### Omniwipes wet fleur

Fertig getränkte Premiuntücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet fleur macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft-Tücher im Format 28 cm x 30 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50 g/qm, 100 % PES. Jede Tücherpackung à 90 Blatt ist mit je 2,25 Liter Omnidid Fleur fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spendereimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnidid Fleur ist gutachterlich bestätigt.

Beutel, 90 Tücher Art.-Nr. 652295  
Leereimer Art.-Nr. 755028

EUR  
16,90  
Beutel

EUR  
5,30  
Leereimer



### Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisep IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisep IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahntechnischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikon, Alginaten und Hydrokolloiden. Für Ultraschallbad geeignet. Urtäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten.

Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 381976

EUR  
65,30



### Omnisept Plus

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich der Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad. Verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chlorid- und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11). Erfüllt die Anforderungen an die vollständige Viruzidie.

Dosierflasche, 1 Liter Art.-Nr. 482152  
Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 482094

EUR  
13,70  
Flasche 1 l

EUR  
89,70  
Kanister 10 l



### Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyc-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis-10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Flasche, 1 Liter Art.-Nr. 344560  
Kanister, 5 Liter Art.-Nr. 344564

EUR  
12,90  
Flasche 1 l

EUR  
56,40  
Kanister 5 l

Vollviruzid,  
alkoholfrei  
und  
aldehydfrei!



### OmniBiozid PLUS

Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Intraoralkameras. Tuberkulozid und VIRUZID. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid Konzentration 1 Minute. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat).

Sprühflasche, 500 ml Art.-Nr. 745468  
Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 745469

EUR  
6,90  
500 ml

EUR  
47,30  
Kanister 10 l



### Omnipur

Aldehyd- und phenolfreie Flächendesinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz wie z. B. Praxiseinheiten sowie von Flächen aller Art wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit Zitrusduft. VAH/DGHH-gelistet.

Dosierflasche, 1 Liter Art.-Nr. 459054  
Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 474820

EUR  
10,50  
Flasche 1 l

EUR  
56,90  
Kanister 10 l

Vollviruzid,  
alkoholfrei  
und  
aldehydfrei!



### Omniwipes wet & easy PLUS

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Intraoralkameras. Tuberkulozid und vollviruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Bakterien (E. hirae., P. aeruginosa, S. aureus, E. coli) und Candida albicans nach VAH und EN16615 (hohe Belastung). Konzentration 2 Minuten. Flache Packung zum verstauen in schmalen Schubladen.

Packung, 2x 15 Tücher Art.-Nr. 745474

EUR  
6,50



### Omniwipes neutral

Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion im dental-medizinischen Bereich von kleinen Flächen, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH/DGHH-gelistet.

Beutel, 100 Feuchttücher Art.-Nr. 339113  
Leerdose Art.-Nr. 339217

EUR  
2,10  
Beutel

EUR  
4,90  
Leerdose



### Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

Foamer-Flasche, 400 ml Art.-Nr. 308698

EUR  
9,70



### Salivasept

Spezialpräparat zur Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbeckenreiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

Flasche, 750 ml Art.-Nr. 455494

EUR  
6,90



**MD 520**

Formaldehydfreie Gebrauchslösung zur Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten, korrosionsfesten Artikulatoren etc. Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch hervorragende Reinigungswirkung. Anwendbar u. a. für Alginat, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide. Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität.

- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad, 10 Minuten im Hygojet. VAH/DGHH-gelistet.
- Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid (behüllte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie gegen unbehüllte Viren wie Adeno-Viren, Noro-Viren).
- Wirkstoffbasis: Aldehyde und quartäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten.



EUR  
27,90  
Flasche 2,5 l

EUR  
104,00  
Kanister 10 l

Flasche, 2,5 Liter Art.-Nr. 376520  
Kanister, 10 Liter Art.-Nr. 386805

**Orotol® plus**

Aldehyd- und schaumfreies Konzentrat für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamabscheider. Intensive Reinigungskraft, beseitigt auch hartnäckige Ablagerungen. Quartäre Ammoniumverbindungen. Einwirkzeit 5 Minuten.



EUR  
87,90  
Basisset

EUR  
36,90  
Flasche 2,5 l

Basis-Set, 2,5 Liter Orotol plus  
2,5 Liter MD 555 cleaner 800 ml MD 550  
Orocup Art.-Nr. 459801  
Flasche, 2,5 Liter Art.-Nr. 354417

**MD 555 cleaner**

Schaumfreier Spezialreiniger mit verbesserter Rezeptur für Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art. Die regelmäßige Anwendung von MD 555 cleaner beugt einer Belagsbildung in der Sauganlage vor. Verstopfungen in der Sauganlage durch den Einsatz von schwerlöslichen Prophylaxe-Produkten, wie Prophylaxepulvern oder Pearlprodukten, speziell auf Basis von Calciumcarbonaten, werden vermieden und bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Intensivste Reinigungswirkung gegen Ablagerungen und Verschlämmungen. Geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheitenherstellern empfohlen. Ideal in Kombination mit Orotol plus oder Orotol ultra.



EUR  
24,90

Flasche, 2,5 Liter Art.-Nr. 700492

**FD 333 forte wipes Schnelldesinfektion**

Voll viruzide gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar

- Bakterizid inkl. Tb, fungizid, viruzid (geprüft nach DVV/RKI und EN 14476)
- Schnelle Desinfektionswirkung
- Extragrosse Tücher
- Frischer Zitronenduft
- Tuchgröße: 20 x 30 cm



EUR  
21,95

Packung, 100 Tücher Art.-Nr. 737715



**neodisher® PreStop**

Sprühschaum zum Aufsprühen auf kontaminierte Instrumente direkt nach der Anwendung. Korrosionsschutzmittel verhindert Lochkorrosion auf Edstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände physiologischer Kochsalzlösung entsteht. Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf dem Instrumentarium während der Kontaktzeit (bakteriostatisch). Geeignet besonders für chirurgische Instrumente inklusive MIC-Instrumente. Das Abspülen der Instrumente ist vor der Aufbereitung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG / TDI) nicht erforderlich.



Für die  
Trockenlagerung  
der Instrumente

Seit Mitte Juli ist neodisher PreStop mit einer neuen verbesserten Rezeptur erhältlich! Diese neue Rezeptur hat folgende Vorteile:

- eine selbsttätige Reinigungsleistung
- Lagerung von 72 h der eingesprühten Instrumente statt nur wie vorher 24 h
- kennzeichnungsfrei und daher im Rahmen des Personalschutzes besonders von Bedeutung

**Verhindert das Antrocknen von Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente, optimal bei Trockenlagerung von Instrumenten.**

Flasche, 0,75 Liter Art.-Nr. 725975

EUR  
19,90

**neodisher® MediClean Dental**

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialschonend. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



EUR  
37,50

Kanister, 5 Liter Art.-Nr. 455733

**neodisher® Z Dental**

Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten. Neutralisiert verschleimte Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten. Auch für die maschinelle Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



EUR  
8,90  
Flasche 1,0 l

EUR  
38,70  
Kanister 5 l

Flasche, 1 Liter Art.-Nr. 417816  
Kanister, 5 Liter Art.-Nr. 480032

**neodisher® MediKlar Dental**

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – mit speziellen Benetzungskomponenten für eine verbesserte Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inkl. Übertragungsinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien. Auch für schwer benetzbare Materialien wie z.B. Kunststoffe bestens geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.



EUR  
9,90  
Flasche 1,0 l

EUR  
10,90  
Flasche 0,95 l

Flasche, 1 Liter Art.-Nr. 342598  
Flasche, 0,95 Liter\* Art.-Nr. 747324

\*Kein Umfüllen mehr nötig – direkt in Ihren MELAtherm RDG einsetzbar.



Profi-  
Reinigungs-  
tücher  
für Oberflächen,  
Sonderreinigung,  
Sanitär



**EVO® GT Mikrofaser-Profitücher**

Hochwertige Mikrofaser-Profitücher, für alle Oberflächen. Streifen- und fussfreie Reinheit, sehr gut geeignet, um Instrumente zu trocknen nach manueller Reinigung & Desinfektion oder aus Thermodesinfektoren ohne aktive Trocknung. Geeignet auch für die Reinigung der Kammern der Aufbereitungs-Geräte wie Sirona DAC, RDG, Sterilisator und Ultraschallgerät. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen. Mehrwegtuch extrem lange haltbar. Die Farbcodierung und die aufgedruckten Anwenderpiktogramme garantieren die sichere Zuordnung zu den Einsatzbereichen. Saugt Flüssigkeiten vollständig auf. Weicher, textiler Griff und exzellentes Gleitverhalten. Reinigungsmittelbeständig und Maschinenwaschbar bis 60 °C. Größe 40 cm x 40 cm

Packung, 10 Stück, **Oberflächen, blau** Art.-Nr. 370756  
Packung, 10 Stück, **Sonderreinigung, z.B. Instrumente, grün** Art.-Nr. 370772  
Packung, 10 Stück, **Sanitär, gelb** Art.-Nr. 370790

EUR  
31,90



**Reinigungsbürste mit extra harten Kunststoffborsten**

Reinigungsbürste für hartnäckige Verschmutzungen.

- hitzebeständig bis 134 °C
- Borstenhärte: extra hart
- Farbe blau

- Bürstenkopflänge: 30 mm und 45 mm
- Borstenlänge: 12 mm
- Gesamtlänge: 165 mm
- thermodesinfizierbar

Packung, 10 Stück Art.-Nr. 725861

EUR  
29,90

**Noch mehr Spaß beim Einkaufen:  
Besuchen Sie unseren Online-Shop unter [www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de)**

Bestellformular ausfüllen, faxen oder telefonieren ist Ihnen zu aufwendig? Kein Problem! Für Sie haben wir auf unserer Website [www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de) einen Online-Shop eingerichtet, auf dem Sie mit wenigen Klicks unser gesamtes Warensortiment bestellen können – **unkompliziert, schnell und sicher dank SSL-Zertifikat.**

- Profitieren Sie von unseren ständig wechselnden, attraktiven Aktionen.
- Alle Bestellungen an Werktagen bis 16 Uhr werden am gleichen Tag an unseren Versand weitergeleitet.
- Der Retourversand von Verbrauchsmaterialien ist kostenlos.



# INSTRUMENTE UND ZUBEHÖR



### Crystal HD Thin Grip Mundspiegel

40 % heller als Standard Rhodium-Spiegel. Schattenfreie, farbgenaue Wiedergabe, kratzfester als Rhodiumgläser, autoklavierbar 136 °C, deutlich geringere Augenbelastung und -ermüdung, keinerlei Schmutzrand durch glatten, randlosen Übergang vom Spiegelglas in die Fassung. Farben NEON bunt gemischt. Zusätzlich zur Größe 4 (Spiegelglasdurchmesser: 22 mm) sind die Thin Grip Mundspiegel auch in Größe 5 (24 mm) erhältlich. Zudem sind diese Mundspiegel auch als Farbsortiment „Metallic“ verfügbar.

EUR 80,50

Packung, 12 Stück Art.-Nr. 653642



### Crystal HD Soft Grip Mundspiegel

40 % heller als Standard Rhodium-Spiegel. Schattenfreie, farbgenaue Wiedergabe, kratzfester als Rhodiumgläser, autoklavierbar 136 °C, deutlich geringere Augenbelastung und -ermüdung, keinerlei Schmutzrand durch glatten randlosen Übergang vom Spiegelglas in die Fassung. Farben NEON bunt gemischt mit Soft-Grip. Zusätzlich zur Größe 4 (Spiegelglasdurchmesser: 22 mm) sind die Soft Grip Mundspiegel auch in Größe 5 (24 mm) erhältlich. Zudem sind diese Mundspiegel auch als Farbsortiment „Metallic“ verfügbar.

EUR 80,50

Packung, 12 Stück Art.-Nr. 700874

In vielen Farben erhältlich



### Zirc E-Z Jett Kassette für Instrumente

Die ideale Kassette für Instrumentensätze (PA, PZR, Untersuchung). Seitliche Klappdeckel fixieren die Instrumente sicher im Tray. Die großzügige Aussparung am Boden des Trays ermöglicht die optimale Reinigung im Thermodesinfektor. Autoklavierbar. Farbe blau.

Kassette für 5 Instrumente Art.-Nr. 376175  
Kassette für 8 Instrumente Art.-Nr. 661154



EUR 32,00  
5 Instrumente

EUR 44,00  
8 Instrumente



### Omni Minibrush Polierbürstchen

Omni Minibrush mit Nylonborsten und Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Drehzahlbereich: max. 5.000 U/min, Einmal-Produkt

Packung, 100 Stück Art.-Nr. 309580

EUR 42,90



### Omni Minibrush soft Polierbürstchen

Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Speziell für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Mit Winkelstückschäft. Drehzahlbereich: max. 5.000 U/min, Einmal-Produkt.

Packung, 100 Stück Art.-Nr. 410337

EUR 43,30




### Instrumentenkappen Omni Tip Cover

Universelle Instrumenten-Schutzkappen aus flexiblem Kunststoff zur Vermeidung von Verletzungsrisiken und Schutz vor Beschädigung. Einfache Anwendung – zuverlässiger Schutz. Die beiden verfügbaren Größen decken alle gängigen Instrumentengrößen und -formen ab.

Größe 1: 2,5 mm x 28 mm, Packung, 10 Kappen Art.-Nr. 707933  
Größe 2: 4 mm x 28 mm, Packung, 10 Kappen Art.-Nr. 707934

EUR 4,90

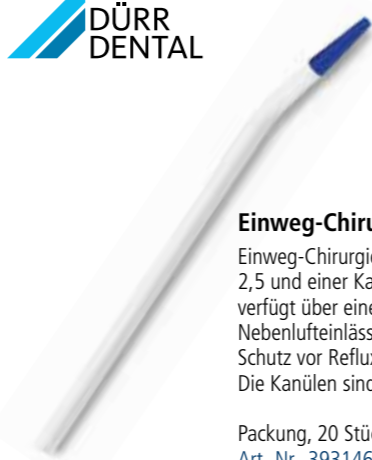

### Einweg-Chirurgische Absaugkanülen

Einweg-Chirurgiekanülen mit einem Durchmesser von 2,5 und einer Kanülenlänge von ca. 17 cm. Die Kanüle verfügt über eine Spitze mit integrierten Protect-Nebenlufteinlässen. Diese bietet den bestmöglichen Schutz vor Reflux aus dem Saugsystem. Die Kanülen sind steril, einzeln verpackt.

Packung, 20 Stück Art.-Nr. 393146  
Packung, 100 Stück Art.-Nr. 422655

EUR 19,50

EUR 75,90

# PATIENTENZUBEHÖR



### Instrumentenschutzkappen gelocht, rechteckig, klar

Die Einweg-Instrumentenschutzkappen werden nach der Reinigung und Desinfektion auf die Spitzen gesteckt. Sie können bei 134 °C sterilisiert werden. Die Kappen sind belüftet, d. h. sie besitzen Perforationen, damit Dampf oder Gas durchdringen kann. Größe 2 mm x 9 mm x 25 mm

Packung, 100 Stück Art.-Nr. 642663

EUR 13,50



### Instrumentenschutzkappen gelocht

Die Einweg-Instrumentenschutzkappen werden nach der Reinigung und Desinfektion auf die Spitzen gesteckt. Sie können bei 134 °C sterilisiert werden. Die Kappen sind belüftet, d. h. sie besitzen Perforationen, damit Dampf oder Gas durchdringen kann.

Packung, 70 Stück, blau Ø 3-4 mm Art.-Nr. 701177

Packung, 70 Stück, grün Ø 4-5 mm Art.-Nr. 704425

Packung, 70 Stück, gelb Ø 6-7 mm Art.-Nr. 701176

EUR 26,90



### Roeko Surgitip Einmalkanülen

Die sterile chirurgische Einmalkanüle ermöglicht dank ihrer feinen Spitze optimales, sicheres Absaugen bei chirurgischen Eingriffen.

Packung, 100 Einmalkanülen Ø 2,5 mm mit Spitzenaufsatz, 5 Doppeladapter Art.-Nr. 467358

Packung, 100 Einmalkanülen Ø 4,8 mm ohne Spitzenaufsatz Art.-Nr. 467374

Packung, 100 Einmalkanülen Ø 1,2 mm micro Art.-Nr. 417985

EUR 118,50  
Ø 2,5 mm

EUR 109,90  
Ø 4,8 mm

EUR 142,50  
Ø 1,2 mm



### Variator®-Kit sterile Einmalinstrumente

Steriles Einmalbehandlungsset, enthält Mundspiegel, Pinzette und Sonde. Großer Anmischspatel zum Mischen von Zement und Füllungsmaterialien, Kugelkopf und Heidemannspatel zum Stopfen. Praktisch bei Hausbesuchen, Risikopatienten und in Notfällen. Alle drei Instrumente sind Gamma-sterilisiert und zusammen blisterverpackt. Sicher und bequem – alles steril verpackt in einem Set.

Kit á 10 Sets Art.-Nr. 382880

EUR 8,70

dental bauer



### Omni-Spender für die Einmal-Patientenumhänge

Spender für die Wand oder Tischablage. Farbe weiß.

Stück Tischspender Art.-Nr. 398100  
Stück Wandspender, mit verstärkter Rückwand Art.-Nr. 318936

EUR 14,50  
Tischspender

EUR 16,30  
Wandspender



### Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe der Umhänge: 54 cm x 60 cm

Rolle, 80 Umhänge, weiß Art.-Nr. 417909

Rolle, 80 Umhänge, hellblau Art.-Nr. 417926

Rolle, 80 Umhänge, grün Art.-Nr. 318930

EUR 9,90



### Omni OraCare

Antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung für professionelle Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. Für einen frischen Atem. 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. Besonders geeignet für die Mundhöhlen-Antiseptis vor jeder Patientenbehandlung.

Flasche, 1 Liter Art.-Nr. 691458

EUR 7,99



### Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe: 28 cm x 27 cm

Rolle, 100 Taschen, hellblau Art.-Nr. 342170

Rolle, 100 Taschen, weiß Art.-Nr. 342176

EUR 6,90



### Omni Bib Holder

Einweg-Serviettenhalter mit Klebeverschluss, größenflexibel, Farbe weiß.

Packung, 250 Stück Art.-Nr. 727450

EUR 7,90



### Bib-Eze – Einweg Patientenserviettenhalter

Hygienisches und unkompliziertes Anbringen durch zwei Klebestreifen. Nach Gebrauch gemeinsam mit der Serviette zu entsorgen. Tragekomfort durch weiches Krepp-Papier. One Size fits all. Bib-Eze bedeutet perfekte Sicherheit in der Hygienekette!

Packung, 250 Stück Art.-Nr. 463592

EUR 11,10



**BARRIER® OP-Mantel**

Der Einmal-OP-Mantel wird aus Polypropylenfaser-Vlies – sogenanntem SMS-Vlies – hergestellt, das ausreichenden Schutz vor Flüssigkeiten bietet. Perfekt für die Aufbereitung von Instrumenten, unter der Arbeitsschutzschürze zu tragen sowie bei chirurgischen Eingriffen. Länge 127 cm, Größe L

Stück Art.-Nr. 349999

EUR  
3,10



**Schutzmantel unsteril**

Geeignet für Besucher (z. B. für externe Depotttechniker, Mitarbeiter vom Dentallabor, Validierer) im Aufbereitungsraum und hygienesensiblen Bereichen. Perfekt für die Aufbereitung von Instrumenten, unter der Arbeitsschutzschürze zu tragen. Länge: 124 cm. Farbe blau. Größe L.

Packung, 50 Stück Art.-Nr. 410268

EUR  
52,90

Als Schutz unter der Arbeitsschürze zu tragen!



**Guttasyn-Arbeitsschutzschürzen – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung**

Arbeitsschutzschürze aus PVC-Spezialfolie mit vier eingeschweißten Kunststoffösen und Hals- und Hüftbändern, M3 0,3 mm ohne Gewebe, die Arbeits-Chemikalienschutzschürzen sind baumustergeprüft- und zertifiziert. PSA-Kategorie III, EN 14605:2005 + A1:2009 sowie EN 340:2003  
Farbe blau  
Größe 80 cm x 100 cm

Stück Art.-Nr. 706599

EUR  
14,50



**Arbeitsschutzschürze – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung**

Arbeitsschutzschürze aus PVC-Spezialfolie mit vier eingeschweißten Kunststoffösen und Hals- und Hüftbändern, M5 0,5 mm ohne Gewebe, die Arbeits-Chemikalienschutzschürzen sind baumustergeprüft- und zertifiziert. PSA-Kategorie III, EN 14605:2005 + A1:2009 sowie EN 340:2003  
Farbe weiß, Größe 90 cm x 120 cm

Stück Art.-Nr. 706600

EUR  
16,50



**Lila Handschuhe – mehr Sicherheit bei der Instrumentenaufbereitung**

Tun Sie etwas mehr für den Schutz Ihres Personals im Hygiene-Aufbereitungsprozess.  
– Nitrilarbeitshandschuh mit Baumwollflockenfutter – ohne Latex  
– ideal für den Umgang mit Chemikalien  
– schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen  
– Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge  
– griffige Struktur erlaubt rutschsicheres Halten aller Gegenstände, erhöht jedoch nicht das Tastgefühl  
– desinfizierbar + autoklavierbar bis 121 °C (bis zu 5 mal)

Packung, 3 Paar Größe 7 (S) Art.-Nr. 391143  
Packung, 3 Paar Größe 8 (M) Art.-Nr. 391211  
Packung, 3 Paar Größe 9 (L) Art.-Nr. 415539  
Packung, 3 Paar Größe 10 (XL) Art.-Nr. 435486

EUR  
28,90

**Nitril Schutzhandschuhe mit langer Stulpe**

– persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie 3 für Reinigung und Desinfektion  
– Schutz vor Verletzungen durch Stiche, Lösungsmittel und Chemikalien  
– weiches Innenfutter, konturierte Griffflächen, latexfrei,  
– persönliche Schutzausrüstung nach EN 374 + EN 388  
– autoklavierbar bis 121° C, desinfizierbar, mehrfach verwendbar, Farbe lila

Packung, 1 Paar Größe 8 (M) Art.-Nr. 374365



EUR  
9,10



**Peha-soft® nitrile Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe**

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch, besonders reißfest und sicher; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen. Für alle Bereiche, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Geprüft nach folgenden Normen EN 455 Teil 1-4 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch), EN 374 Teil 1-3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen), EN 420 (Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe), EN 388 (Kennzeichnung und Leistungsstufen von Schutzhandschuhen).

Packung, 100 Stück

Größe XS Art.-Nr. 389180  
Größe S Art.-Nr. 394688  
Größe M Art.-Nr. 402650  
Größe L Art.-Nr. 402760

EUR  
6,40  
Größe XS-M

EUR  
11,60  
Größe L



**Peha-soft® nitrile guard Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit langer Stulpe**

Packung, 100 Stück

Größe XS Art.-Nr. 707964  
Größe S Art.-Nr. 349622  
Größe M Art.-Nr. 349628  
Größe L Art.-Nr. 710839

EUR  
7,90  
Größe XS-M

EUR  
9,69  
Größe L



**Mundschutz mit Gesichtsschild**

OP-Mundschutz, 4-lagig und spritzdicht, weiches Innenvlies, mit Gesichtsschild, mit integriertem Anti-Beschlagsband, Farbe blau, zum Binden.

Packung, 50 Stück Art.-Nr. 371438

EUR  
46,90



**Flexbrush Reinigungsbürste**

Autoklavierbare Reinigungsbürste für die Hände, ideal zur Reinigung der Hände vor und nach der Behandlung. Extra lange, strapazierfähige Borsten auf der Unterseite, Kurzborsten an der Oberseite, autoklavierbar – erfüllt Hygieneauflagen. Länge: 9,5 cm

Stück Art.-Nr. 428703

EUR  
2,70



**Latex Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe**

Puderfreier Latex Einmal-Untersuchungs- und Chemikalienschutzhandschuhe geprüft nach folgenden Normen: EN 374 Teil 1-4 (Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen) und EN 455 Teil 1-4 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) sowie PSA 89/686/EEC (Anforderungen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)). Unsteril, mit Rollrand. AQL 1,5, Beidhändig verwendbar. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffbarkeit durch mikrogeraute Handfläche.

Packung, 100 Stück

Größe XS Art.-Nr. 321913  
Größe S Art.-Nr. 321919  
Größe M Art.-Nr. 321945  
Größe L Art.-Nr. 321951  
Größe XL Art.-Nr. 321957

EUR  
5,70



**Überschuhe CPE für den Aufbereitungsraum**

Geeignet für Besucher (z.B. für externe Depotttechniker, Mitarbeiter vom Dentallabor, Validierer) im Aufbereitungsraum und hygienesensiblen Bereichen. Farbe blau. Stärke: 35 µm.

Beutel, 2.000 Stück Art.-Nr. 337886



EUR  
52,90





**Schutzbrille iSpec Fit OTG Uvex für Brillenträger**

Leichte Überbrille mit neuester Scheibentechnologie. Kein Kontakt der Bügel mit der vorhandenen Korrekturbrille. Gute Abdeckung des Augenraumes. Weiche, besonders flexible Bügelenden. Gewicht: 37 g, Überbrille blau

Stück Art.-Nr. 314226

EUR 20,30



**Schutzbrille iSpec Super Lite Fit Uvex**

Die leichteste Schutzbrille der Welt. Flexibles innovatives Bügelkonzept, X-Stream-Technologie für höchsten Tragekomfort und perfekte Passform, aerodynamisch optimierte und inklinierte Scheibengeometrie, Gewicht: 18 g, Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei. Fassung Crystal, Scheibe farblos, UV-Bereich 2-1,2

Stück Art.-Nr. 301327

EUR 19,80



**Schutzbrille iSpec Flexi Fit II Uvex**

Extrem leichte und moderne Schutzbrille. Mit transparenter Fassung, weiche Softbügel. Flanken-/Seitenschutz bietet zusätzliche Sicherheit. Einfacher Scheibenwechsel, Bügellänge individuell einstellbar. 100 %iger UV-Schutz. Sehr leicht mit 38 g Gewicht. Fassung blau transluzent, Scheibe farblos.

Stück Art.-Nr. 451490

EUR 16,50



**Schutzbrille Monoart® Light für Brillenträger**

Ventilation im Seitenschutz. Kann über Korrekturbrillen getragen werden. Ideal auch für den Patienten. Unbeschichtet, daher sterilisierbar. Gewicht 43 g.

Stück Art.-Nr. 343976

EUR 7,40



**Mundschutz mit Augenschutz Monoart**

Filterleistung über 99 %, latexfrei, glasfaserfrei, nickelfrei, kupferfrei, ultraschallvernäht, mit flexiblem Nasenbügel und integriertem Augenschutzschild, 3-lagiger Mundschutz mit Visier, mit Gummizug. Farbe blau.

Packung: 25 Stück Art.-Nr. 693399

EUR 9,50



**Augenspülflasche**

Die Augenspülflasche ist bestimmt zum sofortigen Spülen der Augen mit Wasser zur Entfernung eingedrungener Fremdstoffe vor dem Einsetzen einer therapeutischen Behandlung. Als Arbeitssicherheitsmaßnahmen sollten Augenspülflaschen jederzeit griffbereit in der Praxis vorhanden sein.

Flasche, 500 ml Art.-Nr. 730611

EUR 21,50

schülke →



**esentan® wash lotion**

Seifenfreie Waschlotion auf Basis besonders haut-milder Tenside und naturidentischer Wirk- und Pflegekomponenten. Allantoin schützt die Haut vor Austrocknung und Reizungen. Für alle Hauttypen geeignet, auch für Säuglings- und Altershaut. Erhält den Säureschutzmantel der Haut.

EUR 7,90  
1 Liter

Euroflasche, 1 Liter Art.-Nr. 436560  
Euroflasche, 1 Liter hyclick Art.-Nr. 724848

EUR 9,90  
1 Liter hyclick



**desderman® pure Händedesinfektion\***

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Besonders hautverträglich. Der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege: Die alkoholbedingte Austrocknung der Haut wird durch Zusatz von Feuchthaltefaktoren vermieden, ausgeprägte mikrobizide und viruzide Wirkung aufgrund des Ethanolgehalts.

Euroflasche, 1 Liter Art.-Nr. 423685  
Euroflasche, 1 Liter hyclick Art.-Nr. 733320

EUR 7,90  
1 Liter

EUR 9,90  
1 Liter hyclick



**sensiva® wash lotion**

sensiva wash lotion ist eine besonders hautverträgliche, farbstoff- und parfümfreie Waschlotion auf Syndet-Basis mit einem sehr geringen Allergiepotential. Vor/nach hygienischer und chirurgischer Händedesinfektion. Syndet auf Basis hautverträglicher Tenside. Hautschonend, gut reinigend, pH-neutral. Besonders für Allergiker geeignet, da farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei.

EUR 6,90  
1 Liter

Euroflasche, 1 Liter Art.-Nr. 362934  
Euroflasche, 1 Liter hyclick Art.-Nr. 724771

EUR 9,30  
1 Liter hyclick



**sensiva® regeneration cream**

Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut.  
– reichhaltige Regenerationscreme, gut verteilbar  
– farbstoff- und parfümfrei  
– dermatologisch geprüft

Stück, 50 ml Art.-Nr. 389748

EUR 3,30



**desmanol® care Händedesinfektion\***

Neue alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel – farbstoff- und parfümfrei. Umfassender Schutz und nachhaltige Pflege perfekt kombiniert. Ganzjahresprodukt: schützt das ganze Jahr sicher vor Infektionen. Begrenzt viruzid PLUS: inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden. ProPanthenol-Komplex: pflegt mit jeder Händedesinfektion. Pflegeeffekt klinisch bestätigt.  
– hygienische Händedesinfektion: 3 ml desmanol® care 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben.  
– chirurgische Händedesinfektion: Eine ausreichende Menge desmanol® care 90 Sek. in die Hände und Unterarme einreiben.

Euroflasche, 1 Liter Art.-Nr. 746495  
Euroflasche, 1 Liter hyclick Art.-Nr. 746490

EUR 7,50  
1 Liter

EUR 9,30  
1 Liter hyclick

\*Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG

desderman® pure Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. - Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“\*) und Rotaviren ein. - Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. - Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. - Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. \*Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen sich nach aktuellem

Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96% 9,9 g; sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpantenol, Methylglykoll, - Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze\* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“)\*\* ein. - Gegenanzeigen: desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptikum von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. - Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktdermatite) sind möglich. - Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. \*gemäß DGHMVAH-Richtlinien\*\*: Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen sich nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com





Jetzt über 60.000  
Artikel schnell und  
einfach im Online-Shop  
bestellen:  
[www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de)



Deutschland

PLZ-Gebiet  
0

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Cottbus

neue Niederlassung  
ab 01.09.2019

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Döbeln  
Weststraße 20  
04720 Döbeln  
Tel +49 3431 7131-0  
Fax +49 3431 7131-20  
E-Mail [doebeln@dentalbauer.de](mailto:doebeln@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Halle

neue Niederlassung  
ab 01.09.2019

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Chemnitz  
Annaberger Straße 73  
09111 Chemnitz  
Tel +49 371 530083-0  
Fax +49 371 530083-11  
E-Mail [chemnitz@dentalbauer.de](mailto:chemnitz@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
1

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Berlin  
Koenigsallee 56  
14193 Berlin-Grünwald  
Tel +49 30 5863350-0  
Fax +49 30 5863350-99  
E-Mail [berlin@dentalbauer.de](mailto:berlin@dentalbauer.de)

neue Niederlassung  
ab 01.08.2019

PLZ-Gebiet  
2

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Kiel  
Haselbusch 10  
24146 Kiel  
Tel +49 431 535501-3  
Fax +49 431 535501-59  
E-Mail [kiel@dentalbauer.de](mailto:kiel@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Oldenburg  
Gerhard-Stalling-Straße 41  
26135 Oldenburg  
Tel +49 441 20490-0  
Fax +49 441 20490-99  
E-Mail [oldenburg@dentalbauer.de](mailto:oldenburg@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Salzwedel  
Gartenstraße 28  
29410 Salzwedel  
Tel +49 3901 30844-0  
Fax +49 3901 30844-30  
E-Mail [salzwedel@dentalbauer.de](mailto:salzwedel@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
3

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Gütersloh  
Vollrath-Müller-Straße 10  
33330 Gütersloh  
Tel +49 5241 99735-0  
Fax +49 5241 99735-60  
E-Mail [guetersloh@dentalbauer.de](mailto:guetersloh@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Kassel  
Kasseler Straße 62  
34277 Fuldabrück  
Tel +49 561 70933-0  
Fax +49 561 70933-99  
E-Mail [kassel@dentalbauer.de](mailto:kassel@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Magdeburg

neue Niederlassung  
ab 01.09.2019

PLZ-Gebiet  
4

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Düsseldorf  
Mündelheimer Weg 48  
40472 Düsseldorf  
Tel +49 211 658510-0  
Fax +49 211 658510-19  
E-Mail [duesseldorf@dentalbauer.de](mailto:duesseldorf@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
5

Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH  
Im Metternicher Feld 5-7  
56072 Koblenz  
Tel +49 261 92750-0  
Fax +49 261 92750-40  
E-Mail [info@bk-dental.de](mailto:info@bk-dental.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Hamm  
Hafenstraße 14  
59067 Hamm  
Tel +49 2381 7997-0  
Fax +49 2381 7997-99  
E-Mail [hamm@dentalbauer.de](mailto:hamm@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
6

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Frankfurt  
Vollenseestraße 2  
60388 Frankfurt  
Tel +49 6109 5088-0  
Fax +49 6109 5088-77  
E-Mail [frankfurt@dentalbauer.de](mailto:frankfurt@dentalbauer.de)

ab 15.10.2019  
Hanauer Landstraße 172  
60314 Frankfurt

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Saarland  
Hans-Wilhelmi-Straße 4  
66386 St. Ingbert  
Tel +49 6894 99835-0  
Fax +49 6894 99835-99  
E-Mail [st.ingbert@dentalbauer.de](mailto:st.ingbert@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Mannheim  
Dynamostraße 13  
68165 Mannheim  
Tel +49 621 438501-0  
Fax +49 621 438501-13  
E-Mail [mannheim@dentalbauer.de](mailto:mannheim@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
7

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Stuttgart  
Curiestraße 4  
70563 Stuttgart  
Tel +49 711 615537-3  
Fax +49 711 615537-429  
E-Mail [stuttgart@dentalbauer.de](mailto:stuttgart@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Tübingen  
Ernst-Simon-Straße 12  
72072 Tübingen  
Tel +49 7071 9777-0  
Fax +49 7071 9777-50  
E-Mail [info@dentalbauer.de](mailto:info@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Konstanz  
Max-Stromeyer-Straße 172  
78467 Konstanz  
Tel +49 7531 94236-0  
Fax +49 7531 94236-2  
E-Mail [konstanz@dentalbauer.de](mailto:konstanz@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Freiburg  
Jechtinger Straße 10  
Gewerbegebiet Haid  
79111 Freiburg  
Tel +49 761 45265-0  
Fax +49 761 45265-65  
E-Mail [freiburg@dentalbauer.de](mailto:freiburg@dentalbauer.de)

PLZ-Gebiet  
8

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Augsburg  
Zirbelstraße 58  
86154 Augsburg  
Tel +49 821 420940-0  
Fax +49 821 420940-19  
E-Mail [augsburg@dentalbauer.de](mailto:augsburg@dentalbauer.de)

ab 01.10.2019  
Alfred-Nobel-Straße 9  
86156 Augsburg

PLZ-Gebiet  
9

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Nürnberg  
Ostendstraße 196  
90482 Nürnberg  
Tel +49 911 59833-0  
Fax +49 911 59833-222  
E-Mail [nuernberg@dentalbauer.de](mailto:nuernberg@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Regensburg  
Prüfener Straße 35  
93049 Regensburg  
Tel +49 941 78533-3  
Fax +49 941 78533-55  
E-Mail [regensburg@dentalbauer.de](mailto:regensburg@dentalbauer.de)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Erfurt

neue Niederlassung  
ab 01.09.2019

Österreich

profimed Vertriebsgesellschaft mbH  
Brühlstraße 17a  
6922 Wolfurt/Bregenz  
Tel +43 5574 777-27  
Fax +43 5574 642-12  
E-Mail [office@profimed.at](mailto:office@profimed.at)  
[www.profimed.at](http://www.profimed.at)

profimed Vertriebsgesellschaft mbH  
Prinz-Eugen-Straße 19  
4020 Linz  
Tel +43 732 775760  
Fax +43 5574 642-12  
E-Mail [linz@profimed.at](mailto:linz@profimed.at)  
[www.profimed.at](http://www.profimed.at)

dental bauer GmbH & Co. KG  
Niederlassung Graz  
Feldkirchner Straße 11-15  
8054 Seiersberg  
Tel +43 316 281616-0  
Fax +43 316 281616-99  
E-Mail [graz@dentalbauer.at](mailto:graz@dentalbauer.at)

Schweiz

dema dent AG  
Hauptsitz  
Grindelstrasse 6  
8303 Bassersdorf  
Tel +41 44 838 65 65  
Fax +41 44 838 65 66  
[info@demadent.ch](mailto:info@demadent.ch)  
[www.demadent.ch](http://www.demadent.ch)

dema dent AG  
Niederlassung Bern  
Freiburgstrasse 435  
3018 Bern  
Tel +41 31 930 80 10  
Fax +41 31 930 80 11  
[info@demadent.ch](mailto:info@demadent.ch)  
[www.demadent.ch](http://www.demadent.ch)

dema dent AG  
Niederlassung St. Gallen  
Lagerstrasse 4  
9200 Gossau  
Tel +41 71 314 22 00  
Fax +41 71 314 22 01  
[info@demadent.ch](mailto:info@demadent.ch)  
[www.demadent.ch](http://www.demadent.ch)

Niederlande

dental bauer Nederland B.V.  
De Steenbok 12  
5215 ME 's-Hertogenbosch  
Tel +31 73 6900042  
Fax +31 73 6900171  
E-Mail [info@dentalbauer.nl](mailto:info@dentalbauer.nl)  
[www.dentalbauer.nl](http://www.dentalbauer.nl)

Hotline  
00800  
77655440

bundesweit zum Nulltarif

[www.dentalbauer.de](http://www.dentalbauer.de)